


ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ
ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ

www.nevalab.ru

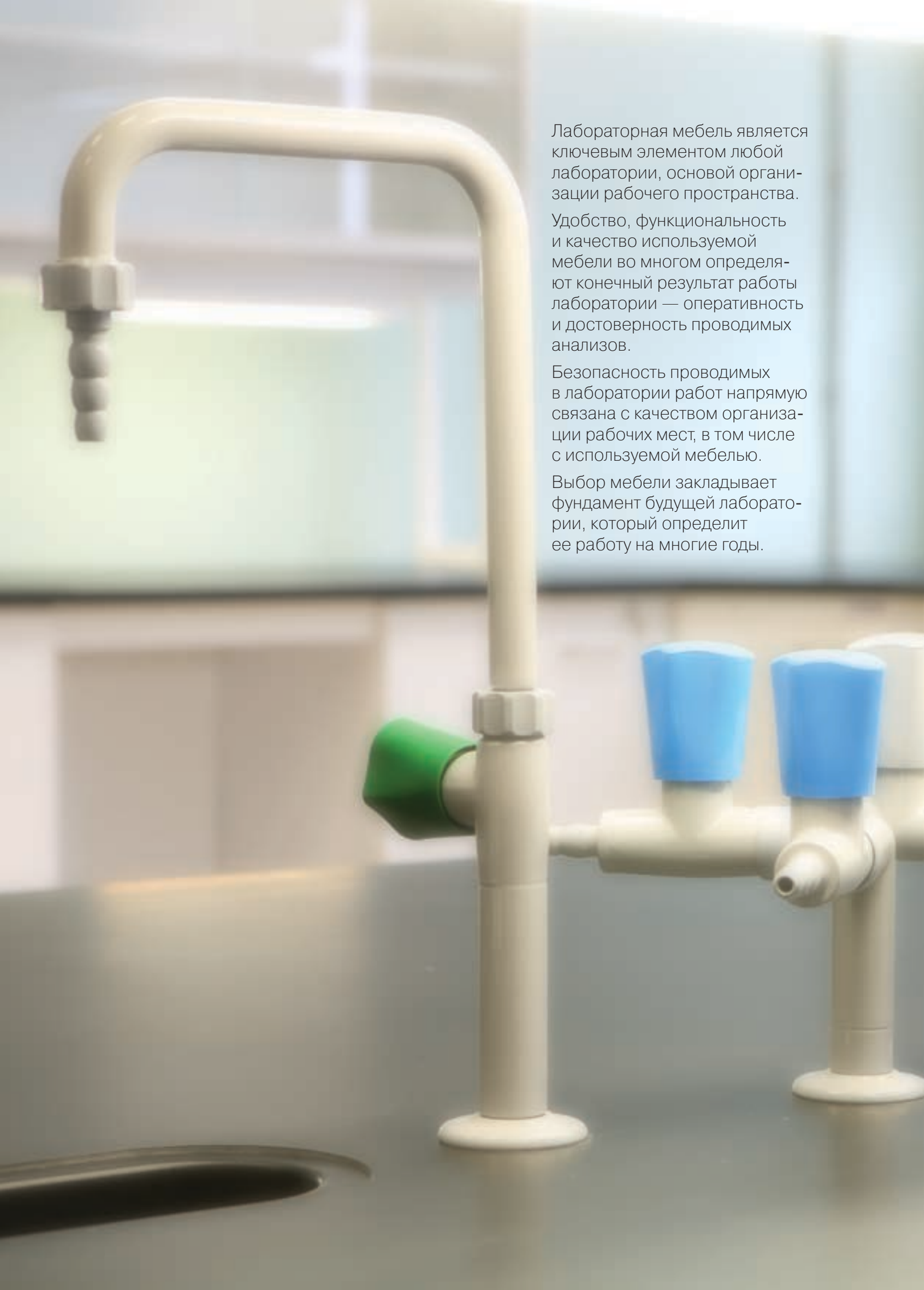

Лабораторная мебель является ключевым элементом любой лаборатории, основой организации рабочего пространства.

Удобство, функциональность и качество используемой мебели во многом определяют конечный результат работы лаборатории — оперативность и достоверность проводимых анализов.

Безопасность проводимых в лаборатории работ напрямую связана с качеством организации рабочих мест, в том числе с используемой мебелью.

Выбор мебели закладывает фундамент будущей лаборатории, который определит ее работу на многие годы.

СОДЕРЖАНИЕ

Материалы рабочих поверхностей 6
Краны, смесители, электрооборудование 10
Раковины-мойки и сливные раковины 12
Тумбы подвесные и подкатные 14

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ EUROMAX

Столы пристенные, приборные передвижные 18
Столы островные 20
Столы торцевые 22
Столы-мойки 23
Столы весовые 24
Установки титровальные 25

ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ EUROMAX

Устройство вытяжных шкафов 28
Шкафы вытяжные (окрашенная сталь) 33
Шкаф вытяжной для установок большой высоты 34
Шкафы вытяжные (нержавеющая сталь) 35
Шкафы вытяжные с мойками (нержавеющая сталь) 36
Шкафы вытяжные во взрывозащищенном исполнении 37
Шкафы вытяжные с мойками во взрывозащищенном исполнении 38
Шкафы вытяжные (стеклопластик) 39
Шкаф вытяжной с мойкой (стеклопластик) 40
Шкафы вытяжные с нагревательными платформами 41
Шкафы для хранения 42
Скруббер 43

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ EUROMINI

Столы пристенные 46
Столы приборные 48
Столы островные 49
Столы-мойки 50
Столы-приставки 51
Столы весовые 52
Столы вспомогательные 53
Установки титровальные 54

ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ EUROMINI

Шкафы вытяжные (окрашенная сталь) 57
Шкафы вытяжные (пластик ПВХ) 58
Шкафы вытяжные с мойками (окрашенная сталь) 59
Шкафы вытяжные модульные 59
Шкафы вытяжные для помещений с низким потолком 60
Шкаф вытяжной с мойкой для нефтепродуктов 60
Шкаф вытяжной для нагревательных печей, шкафы для хранения 61

Стол для подготовки проб с вентиляцией 61
Стеллажи металлические 62
Сейфы 63
Стулья и табуреты лабораторные 64

Алфавитный указатель 66




Почему в лаборатории следует использовать металлическую мебель?

Металл не горит

Лаборатория должна соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Мебель из пожаростойкого материала спасает не только лабораторию — она спасает все здание и людей.

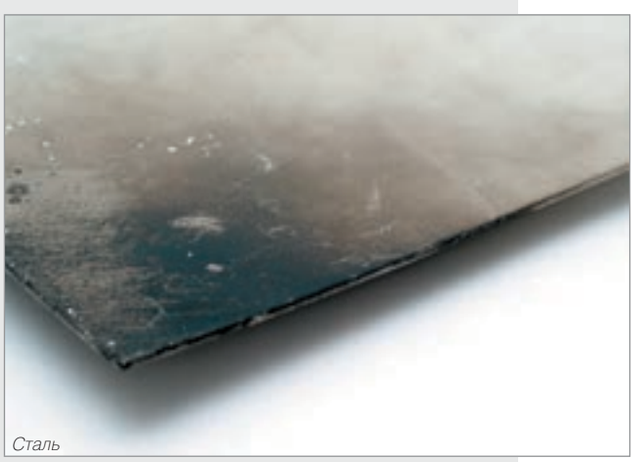

Сталь




ДСП



Металл не теряет форму

В лаборатории всегда используется вода и другие жидкости. Металл не разбухает от влаги, сохраняя прочность и форму всей конструкции. Эпоксидное порошковое покрытие защищает металл от коррозии.

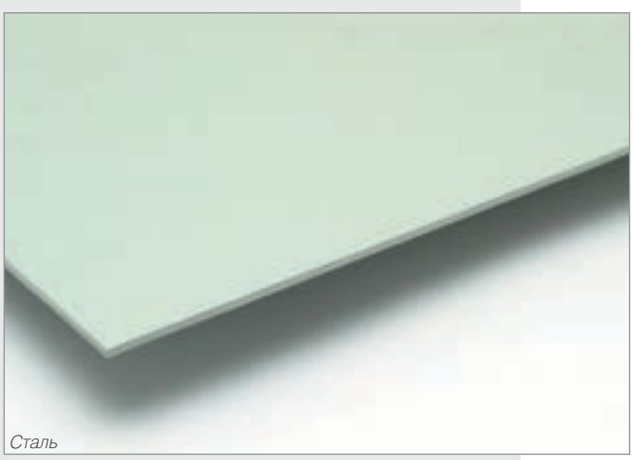


Сталь



ДСП

Металл не ломается

В лаборатории возможны большие механические нагрузки. Металл устойчив к механическим воздействиям, что увеличивает срок службы мебели в несколько раз.

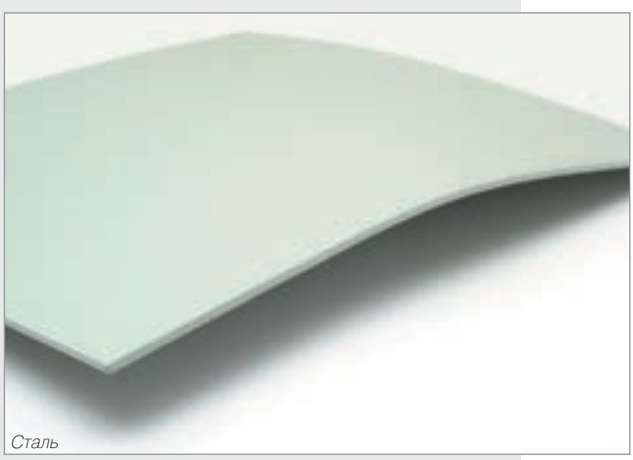

Сталь



ДСП



РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ




Ламинированная плита

Устойчива к кратковременному воздействию концентрированных кислот, щелочей и органических растворителей. Выдерживает кратковременное воздействие температур до 170°С.




Искусственный камень Quarella

Материал изготовлен на основе кварца и эпоксидной смолы. Устойчив при контакте с большинством химических реактивов. Особо устойчив при длительном термоконтакте. Не поддерживает горение. Выдерживает воздействие температур до 300°С.

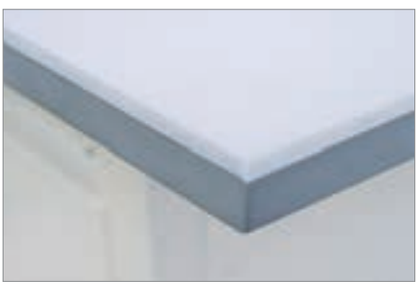

Композит на основе эпоксидных смол Durcon

Устойчив при контакте с большинством химических реактивов, кислот, щелочей, растворителей. Особенно устойчив к длительному тепловому воздействию. Негигроскопичен и негорюч. Выдерживает воздействие температур до 300°С.

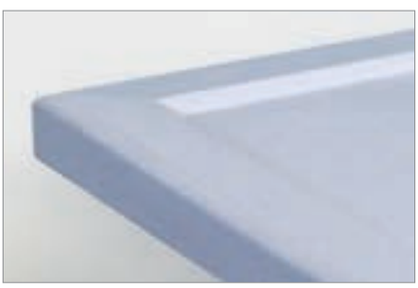

Композит на основе эпоксидных смол Durcon с бортиком


Обеспечивает удержание пролитой жидкости на поверхности, что повышает безопасность при пробоподготовке и проведении анализов.



Химически стойкая керамика

Устойчива к воздействию концентрированных кислот (кроме плавиковой), щелочей и органических растворителей. Устойчива к воздействию высоких температур.



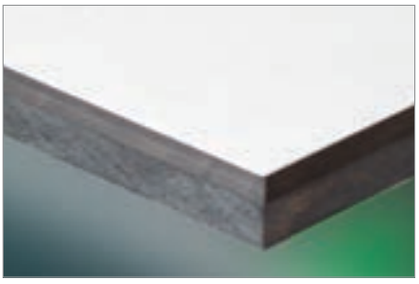

Ламинат высокого давления LabGrade

Химически устойчив, негигроскопичен. Выдерживает воздействие температур до 180°С.



Нержавеющая сталь 0,8 мм с бортиком

Устойчива к кратковременному воздействию концентрированных кислот (кроме соляной), щелочей и органических растворителей. Легко моется. Удерживает до трех литров пролитой жидкости.



Монолитный стеклопластик

Материал на основе эпоксидной смолы. Устойчив к воздействию большинства химических реактивов, кислот, щелочей и растворителей. Выдерживает воздействие температур до 180°С.



Окрашенная сталь

Сталь, покрытая эпоксиполиэфирной порошковой краской. Ударопрочное покрытие с высокими антикоррозионными и электроизоляционными свойствами. Устойчива к растворам щелочей, кислот и органическим растворителям. Выдерживает воздействие температур от -60 до +150°С.




ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ DURCON

- При проведении лабораторных исследований рабочие поверхности столов и вытяжных шкафов подвержены постоянному воздействию влаги, агрессивных веществ и соединений, перепадам температур, а также механическим нагрузкам. Совокупность этих факторов предъявляет особые требования к материалу, из которого изготавливаются рабочие поверхности.
- Эпоксидный композит Durcon обладает высокой устойчивостью к открытому пламени, не поддерживает горения, при высокой температуре остается твердым, не плавится и не испаряется, не изменяет свою форму, плотность и цвет. Материал устойчив к механическим нагрузкам, не расслаивается. Имеет отличные показатели по устойчивости к обычно используемым в лаборатории щелочам, кислотам, спиртам и растворителям.
- Гладкая поверхность плиты Durcon предотвращает накапливание грязи и проникновение влаги вглубь материала. Чтобы очистить поверхность от легких загрязнений, достаточно протереть ее влажной тряпкой. Для удаления пятен можно использовать бытовые чистящие средства, за исключением абразивных порошков. Идеальный способ вернуть изделиям Durcon первоначальный блеск — протереть рабочую поверхность губкой с минеральным маслом.
- Клей-цемент Durcon позволяет исправлять большие сколы и трещины, а также надежно склеивать расколотые изделия. На протяжении более тридцати лет рабочие поверхности Durcon подтверждают свое высокое качество в различных лабораториях.



Изготовленные из эпоксидной смолы Durcon изделия имеют монолитную структуру и не расслаиваются. На поверхности Durcon не образуются пузырьки и трещинки. Отсутствие пористости предотвращает проникновение химических веществ вглубь материала.

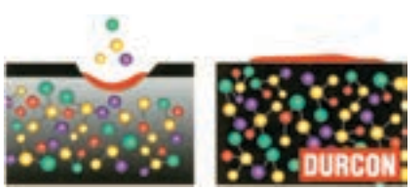

Durcon — материал химически нейтральный, отличающийся высокой кислотостойкостью. Поверхность материала устойчива к воздействию высоких температур.



Сильные полимерные связи эпоксидной смолы делают ее по характеристикам сравнимой с камнем. Однако Durcon не имеет присущей камню пористости.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА DURCON

Характеристика	Метод	Значение
Предел прочности на сжатие, МПа	ASTM D695	252
Прочность на изгиб, МПа	ASTM D790	100
Предел прочности на разрыв, МПа	ASTM D638	72
Плотность, г/см^3	ASTM D792	1,96
Твердость по Роквеллу	ASTM D785	110
Температурное изменение формы (при давлении 264 psi), °C	ASTM D648	176
Температурный коэффициент расширения, м/°C	ASTM D696	$5{,}26\times10^{-4}$
Поглотительная способность для воды, %	ASTM D570	0,0076



196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 46 ЗАО «НеваЛаб»





Материал Durcon отличается очень низкой влагоемкостью. Благодаря этому поверхность не впитывает химические вещества, красители и другие жидкости, используемые в лабораториях. Влага не проникает вглубь материала, что защищает поверхность от расслаивания, деградации и обеспечивает многолетнюю эксплуатацию.

ИСПЫТАНИЕ РАСКАЛЕННЫМ ТИГЛЕМ

Тигель из фарфора с высокими краями (емкостью 15 мл) был нагрет на горелке Бунзена до такого состояния, когда его дно накалилось до темно-красного свечения. Раскаленный тигель был немедленно перенесен и установлен на рабочей поверхности Durcon и оставлен до тех пор, пока он не остыл до комнатной температуры. После окончания испытания на поверхности Durcon не было замечено никаких следов воздействия: не имелось ни пузырей, ни трещин, ни других признаков разрушения рабочей поверхности.

ИСПЫТАНИЕ ГОРЕЛКОЙ БУНЗЕНА

Перевернутая вниз горелка Бунзена размером 3/8 дюйма (9,5 мм) была отрегулирована таким образом, чтобы получить умеренное пламя с внутренним конусом протяженностью 1,5 дюйма (38 мм). Пламя горелки оставалось на рабочей поверхности в течение пяти минут. После окончания испытания на рабочей поверхности Durcon не было отмечено пузырей или растрескивания.

ЛАМИНАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ LABGRADE

LabGrade относится к ламинатам высокого давления твердого класса.

Покрытие LabGrade эффективно в тех случаях, когда требуется особая стойкость к агрессивным химическим веществам.

Декоративные слои с двух сторон и крафт, обеспечивающий основу, пропитаны термореактивными смолами и запрессованы в гидравлическом прессе.

В процессе прессования при температуре 150°С под давлением 9 МПа происходит полимеризация смол.

Получаемый в результате материал не токсичен, химически инертен и безопасен.

LabGrade официально разрешен к применению в контакте с пищевыми продуктами, устойчив к химическим веществам (кроме сильных неорганических кислот) и растворителям, легок в очистке, антистатичен.



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Характеристика	Метод	Значение
Стойкость к поверхностному износу, количество оборотов	EN 438-2.6	350
Устойчивость к царапинам, Н	EN 438-2.14	3
Поглотительная способность для воды, %		1
Термостойкость, °С, не более		180
Огнестойкость	BS 476	класс 2
Электрическое сопротивление, Ом × м		1×10^{8} ÷ 1×10^{9}









КРАНЫ И СМЕСИТЕЛИ

Краны и смесители производства фирмы TOF (Италия).

Специальная серия кранов для воздуха, различных газов и воды, а также смесителей LABORA TOF широко применяется в лабораториях.

Краны и смесители соответствуют требованиям стандарта BS 2874, регламентирующего качество газовой и водной арматуры.

Внешняя и внутренняя поверхность кранов покрыта защитной полимерной краской. Для облегчения идентификации, ручки кранов окрашиваются в различные цвета.



1 Внутри технологических стоек Euromax вся подводка выполняется только жесткими трубами, что позволяет выдерживать большие перепады давления и делает соединения более надежными, исключая утечки газа или воды. Технологические стойки EUROMAX, при заказе хотя бы одного крана, поставляются в комплектации, позволяющей устанавливать два дополнительных крана.

2 Технологическая система EUROMAX позволяет пользователям самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов, доукомплектовывать рабочие места дополнительными кранами для подачи воздуха или газа.



ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ



Съемные нижние панели под столешницей обеспечивают быстрый доступ к водным, газовым и электрическим коммуникациям, которые могут быть проложены внутри столов. Панели открываются пластиковым ключом и легко снимаются, обеспечивая доступ к коммуникациям для обслуживания.



Сервисная стойка с пятью розетками 220 В, двумя компьютерными розетками RJ 45, автоматом отключения питания на 16 А и кабелем 3×1,5 длиной 1,5 м с выводом проводов для подключения к клеммной коробке.

Короб с розетками 220 В, автоматом отключения питания на 10 А и кабелем 3×1 длиной 1,5 м с вилкой (поставляется как опция).

Электрический блок для вытяжных шкафов входит в стандартную комплектацию (кроме шкафов с мойками и взрывобезопасных шкафов).

Блок оснащен тремя розетками 220 В и ДИФ автоматом на 16 А.

В комплект входит электрический кабель 3×1 длиной 1,5 м с вилкой.








РАКОВИНЫ-МОЙКИ



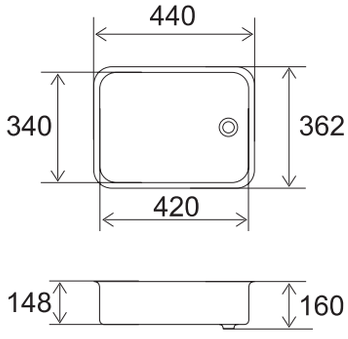


Мойка из нержавеющей стали поставляется в комплекте со столешницей LabGrade.




Мойка из композита Durcon поставляется в комплекте со столешницами LabGrade и Durcon.

Модель L30

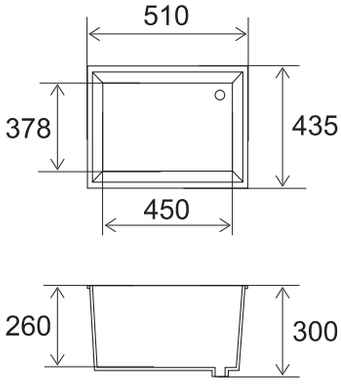


Модель L15

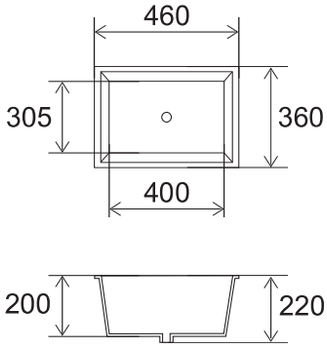




СЛИВНЫЕ РАКОВИНЫ



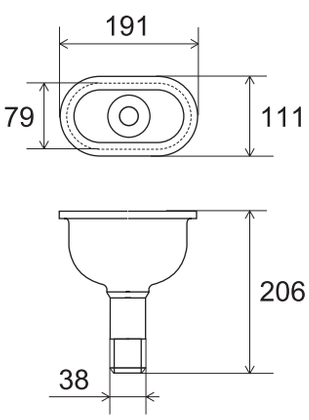

Сливная раковина из композита Durcon поставляется в комплекте со столешницами Durcon.



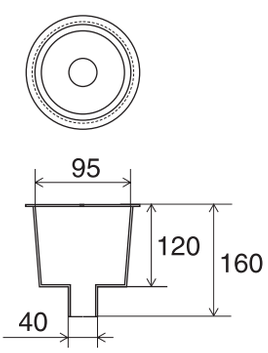

Сливная раковина из полипропилена поставляется в комплекте с керамическими столешницами или столешницами LabGrade.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Durcon — это монолитный материал с идеально плотной структурой. Механические характеристики соответствуют самым прочным видам камня. Материал устойчив к воздействию сильных органических и неорганических кислот и щелочей. Durcon является термически стойким материалом, выдерживает тепловое воздействие до температуры 300°С.

Полипропилен — это водо- и химически стойкий материал. Устойчив к воздействию растворов солей, концентрированных кислот и щелочей, большинства органических растворителей. Полипропилен имеет хорошую термостойкость, он выдерживает температуры до 130°С без изменения формы, имеет высокую твердость и устойчивость к износу.

Нержавеющая сталь представляет собой коррозионностойкий материал. Сталь устойчива к кратковременному воздействию растворов солей, концентрированных кислот и щелочей. Устойчива к воздействию большинства органических растворителей.



ТУМБЫ ПОДВЕСНЫЕ EUROMAX

Используются как дополнительные опции при комплектации столов серий EUROMAX.




Пристенные, островные столы и столы-приставки серии EUROMAX могут дополнительно оснащаться подвесными тумбами.



Весовой стол может быть укомплектован только одной подвесной тумбой.



Дверцы тумб заполнены звукоизолирующим материалом.

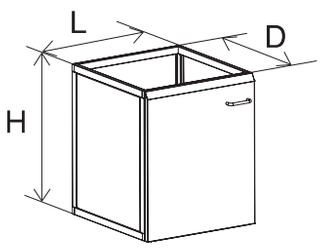

ТУМБЫ ПОДВЕСНЫЕ

Артикул	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, не более, кг
1-01220	Тумба с 3 выдвижными ящиками	500	500	450	40
1-01230	Тумба с 4 выдвижными ящиками	500	500	600	40
1-01232	Тумба с 4 выдвижными ящиками	1200	500	600	90
1-01234	Тумба с 4 выдвижными ящиками	1400	500	600	100
1-01240	Тумба двухсекционная с полкой, 2 дверцы	1200	500	600	80
1-01250	Тумба двухсекционная с полкой, 2 дверцы	1400	500	600	80
1-01260	Тумба для хранения емкости (левая дверца)	500	500	600	40
1-01270	Тумба для хранения емкости (правая дверца)	500	500	600	40
1-01300	Тумба с полкой (левая дверца)	500	500	600	40
1-01310	Тумба с полкой (правая дверца)	500	500	600	40




ТУМБЫ ПОДВЕСНЫЕ EUROMINI

Используются как дополнительные опции при комплектации столов серии EUROMINI.

Стол, оснащенный сливной раковиной, может быть укомплектован только одной тумбой.



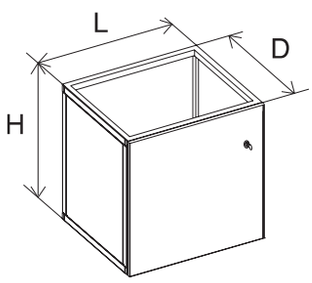


ТУМБЫ ПОДВЕСНЫЕ

Артикул	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, не более, кг
1-02810	Тумба с полкой (левая дверца)	520	525	645	35
1-02830	Тумба с полкой (правая дверца)	520	525	645	35
1-02850	Тумба с 3 выдвижными ящиками	520	525	645	35
1-02860	Тумба с 5 выдвижными ящиками	520	525	645	35

ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ

Используются как дополнительные опции при комплектации столов.



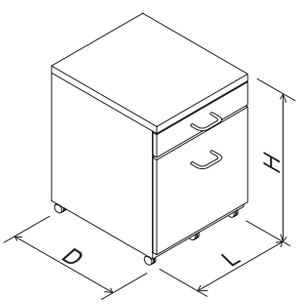

ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ

Артикул	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, не более, кг
1-04460	Тумба с 2 выдвижными ящиками	460	530	640	30
1-04470	Тумба с 3 выдвижными ящиками	460	530	640	30
1-04480	Тумба с 5 выдвижными ящиками	460	530	640	30
1-04490	Тумба с левой дверцей	460	530	640	30
1-04500	Тумба с правой дверцей	460	530	640	30
1-35400	Тумба Инова с 3 выд. ящ., замок	520	500	770	40
1-35410	Тумба Инова с 4 выд. ящ., замок	520	500	770	40
1-35420	Тумба Инова с левой дверцей, замок	520	500	770	40
1-35430	Тумба Инова с правой дверцей, замок	520	500	770	40



EUROMAX
ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

Лабораторная мебель серии EUROMAX — результат долгого и всестороннего изучения особенностей использования лабораторной мебели и вытяжных шкафов в химико-аналитических и технологических лабораториях предприятий топливно-энергетического комплекса, металлургии, машиностроения и пищевой промышленности.

Высокое качество лабораторной мебели серии EUROMAX и ее функциональность делают работу в лабораториях, оснащенных этой мебелью, удобной и эффективной.




- Основой лабораторной мебели серии EUROMAX служит металлический консольный каркас C-FRAME, выдерживающий нагрузки до 200 кг. Такая конструкция мебели позволяет создавать многосекционные комплекты с единой рабочей поверхностью.
- В зависимости от условий работы и решаемых задач в качестве материала для рабочих поверхностей (столешниц) мебели серии EUROMAX может быть выбран либо эпоксидный композит Durcon, либо слоистый пластик LabGrade, либо химически стойкая керамическая плитка, либо ламинированная плита.
- Вытяжные шкафы серии EUROMAX обеспечивают безопасную работу персонала в самых разнообразных условиях: как при работе с агрессивными и токсичными веществами, так и с веществами, образующими взрывоопасные воздушные смеси.

EUROMAX
ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

СТОЛЫ ПРИСТЕННЫЕ


Предназначены для создания рабочих мест, располагающихся в непосредственной близости от стен лаборатории. Являются наиболее часто используемыми и наиболее многофункциональными элементами организации рабочего пространства лабораторий.



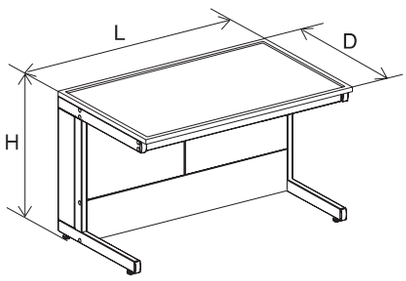

СТОЛЫ ПРИСТЕННЫЕ 1200 ММ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-00470	1200	750	750	ламинат	50
1-00480	1200	750	750	LabGrade	50
1-00490	1200	750	750	керамика	50
1-00500	1200	750	750	Durcon	50
1-00670	1200	750	750	Durcon с бортиком	55
1-00526	1200	750	750	Quarella	50
1-00520	1200	750	900	ламинат	55
1-00530	1200	750	900	LabGrade	55
1-00540	1200	750	900	керамика	55
1-00550	1200	750	900	Durcon	55
1-00680	1200	750	900	Durcon с бортиком	60
1-00565	1200	750	900	Quarella	55

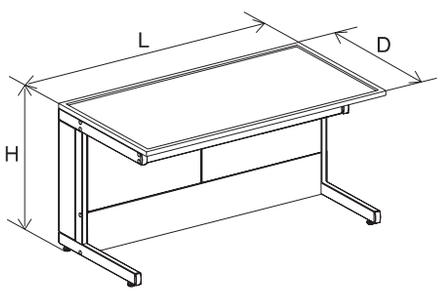


СТОЛЫ ПРИСТЕННЫЕ 1400 ММ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-00570	1400	750	750	ламинат	60
1-00580	1400	750	750	LabGrade	60
1-00590	1400	750	750	керамика	60
1-00600	1400	750	750	Durcon	60
1-00690	1400	750	750	Durcon бортиком	65
1-00615	1400	750	750	Quarella	60
1-00620	1400	750	900	ламинат	65
1-00630	1400	750	900	LabGrade	65
1-00640	1400	750	900	керамика	65
1-00650	1400	750	900	Durcon	65
1-00700	1400	750	900	Durcon с бортиком	70
1-00665	1400	750	900	Quarella	65

СТОЛЫ ПРИБОРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ

Предназначены для создания рабочих мест. Функциональные столы для лабораторий, позволяют легко моделировать рабочее пространство.



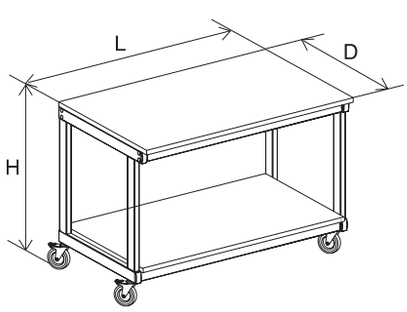

СТОЛЫ ПРИБОРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1200 ММ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-00475	1200	750	750	ламинат	50
1-00485	1200	750	750	LabGrade	50
1-00495	1200	750	750	керамика	50
1-00505	1200	750	750	Durcon	50
1-00675	1200	750	750	Durcon с бортиком	55
1-00496	1200	750	750	Quarella	70
1-00525	1200	750	900	ламинат	55
1-00535	1200	750	900	LabGrade	55
1-00545	1200	750	900	керамика	55
1-00555	1200	750	900	Durcon	55
1-00685	1200	750	900	Durcon с бортиком	60
1-00556	1200	750	900	Quarella	75

СТОЛЫ ПРИБОРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1400 ММ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-00575	1400	750	750	ламинат	60
1-00585	1400	750	750	LabGrade	60
1-00595	1400	750	750	керамика	60
1-00605	1400	750	750	Durcon	60
1-00695	1400	750	750	Durcon бортиком	65
1-00606	1400	750	750	Quarella	80
1-00625	1400	750	900	ламинат	65
1-00635	1400	750	900	LabGrade	65
1-00645	1400	750	900	керамика	65
1-00655	1400	750	900	Durcon	65
1-00705	1400	750	900	Durcon с бортиком	70
1-00656	1400	750	900	Quarella	85

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


В зависимости от требований заказчика пристенные столы могут комплектоваться дополнительным оборудованием.

- Технологические стойки могут использоваться совместно с пристенными лабораторными столами для расширения их функциональности.
- Технологические стойки изготавливаются из стали и покрываются эпоксиполиэфирной краской.
- Стойки оборудованы двумя полками, выполненными из ударопрочного стекла, оснащены электроблоком с четырьмя розетками, выключателем и предохранительным автоматом отключения, а также светильником, устанавливаемым под первой полкой.
- По желанию заказчика технологические стойки могут дополнительно комплектоваться кранами для газа и воды.



Новые светильники



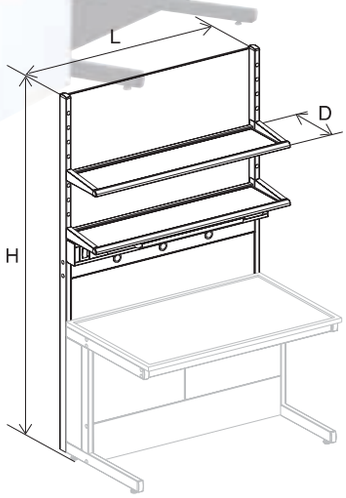


СТОЙКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая поверхность	Примечание	Вес, не более, кг
1-00450	1200	1992	334	стекло ударопрочное	для столов высотой 900 мм	40
1-00451	1200	1992	334	стекло ударопрочное	для столов высотой 750 мм	40
1-00460	1400	1992	334	стекло ударопрочное	для столов высотой 900 мм	50
1-00461	1400	1992	334	стекло ударопрочное	для столов высотой 750 мм	50


ТУМБЫ ПОДВЕСНЫЕ

Артикул	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, не более, кг
1-01220	Тумба с 3-мя выдвижными ящиками	500	500	450	40
1-01230	Тумба с 4-мя выдвижными ящиками	500	500	600	40
1-01232	Тумба с 4-мя выдвижными ящиками	1200	500	600	90
1-01240	Тумба двухсекционная с полкой, 2 дверцы	1200	500	600	70
1-01250	Тумба двухсекционная с полкой, 2 дверцы	1400	500	600	80
1-01234	Тумба с 4-мя выдвижными ящиками	1400	500	600	100
1-01260	Тумба для хранения емкости (левая дверца)	500	500	600	40
1-01270	Тумба для хранения емкости (правая дверца)	500	500	600	40
1-01300	Тумба с полкой (левая дверца)	500	500	600	40
1-01310	Тумба с полкой (правая дверца)	500	500	600	40

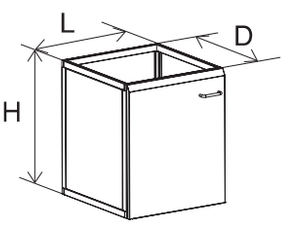

ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Артикул	Наименование
1-00050	Раковина Durcon с краном для воды, жесткой подводкой и фановой трубой 1000 мм
1-00070	Раковина полипропиленовая с краном для воды, жесткой подводкой и фановой трубой 1000 мм
1-00090	Кран для сжатого воздуха с гибкой подводкой 800 мм
1-00100	Кран для газа с гибкой подводкой 800 мм
1-00110	Мойка для глаз с гибкой подводкой 1500 мм
1-35340	Сервисная стойка на 5 розеток
1-00130	Поддоны для реактивов, полипропилен, 10 шт.

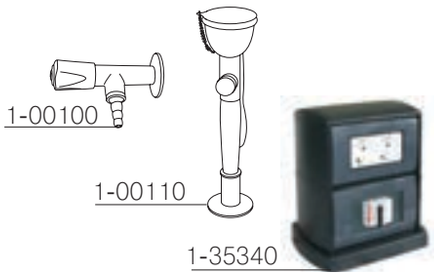

Подробнее о **ПОДВЕСНЫХ ТУМБАХ** смотрите на странице 14.

Подробнее о **РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ** смотрите на страницах 6 – 9.

Подробнее о **КОММУНИКАЦИЯХ** (электрических, сантехнических, газовых) смотрите на страницах 10 – 11.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Каркас тумбы представляет собой прочную металлоконструкцию, покрытую белой порошковой эпоксиполиэфирной краской.


EUROMAX
ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

СТОЛЫ ОСТРОВНЫЕ

Предназначены для создания рабочих мест, располагающихся в центре лаборатории.


Островные столы и комплекты лабораторной мебели на их основе позволяют эффективно организовывать рабочее пространство в помещениях с большими площадями.



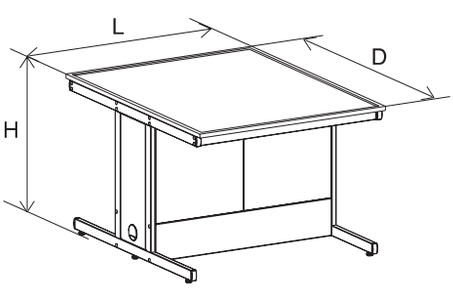

СТОЛЫ ОСТРОВНЫЕ 1200 ММ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-00250	1200	1500	750	ламинат	105
1-00260	1200	1500	750	LabGrade	105
1-00270	1200	1500	750	Durcon	105
1-00410	1200	1500	750	Durcon с бортиком	105
1-00285	1200	1500	750	Quarella	105
1-00290	1200	1500	900	ламинат	110
1-00300	1200	1500	900	LabGrade	110
1-00310	1200	1500	900	Durcon	110
1-00420	1200	1500	900	Durcon с бортиком	110
1-00325	1200	1500	900	Quarella	110

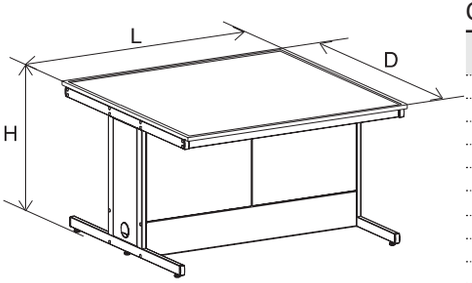

СТОЛЫ ОСТРОВНЫЕ 1400 ММ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-00330	1400	1500	750	ламинат	125
1-00340	1400	1500	750	LabGrade	125
1-00350	1400	1500	750	Durcon	125
1-00430	1400	1500	750	Durcon с бортиком	125
1-00365	1400	1500	750	Quarella	125
1-00370	1400	1500	900	ламинат	130
1-00380	1400	1500	900	LabGrade	130
1-00390	1400	1500	900	Durcon	130
1-00440	1400	1500	900	Durcon с бортиком	130
1-00395	1400	1500	900	Quarella	130

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Островные столы могут быть укомплектованы дополнительным оборудованием.




Стойки технологические для столов островных

- Технологические стойки позволяют расширить функциональные возможности островных столов.
- Стойки оборудованы двумя полками, выполненными из ударопрочного стекла, оснащены электроблоком с четырьмя розетками, выключателем и предохранительным автоматом отключения, а также светильником, устанавливаемым под первой полкой.
- Вертикальные опоры стоек снабжены отверстиями для регулировки полок по высоте, внутри опор размещены водные и газовые коммуникации, выполненные из медных трубок.
- По желанию заказчика технологические стойки могут дополнительно комплектоваться кранами для газа и воды.

Новые светильники



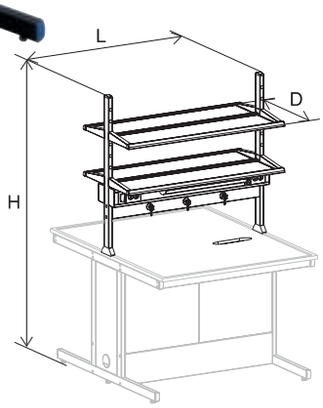


СТОЙКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

Артикул	Длина, мм	Высота, мм	Ширина полок, мм	Рабочая поверхность	Примечание	Вес, не более, кг
1-00230	1200	1992	671	стекло ударопрочное	для столов высотой 900 мм	35
1-00231	1200	2002	671	стекло ударопрочное	для столов высотой 750 мм	35
1-00240	1400	1992	671	стекло ударопрочное	для столов высотой 900 мм	45
1-00241	1400	2002	671	стекло ударопрочное	для столов высотой 750 мм	45


ТУМБЫ ПОДВЕСНЫЕ

Артикул	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, не более, кг
1-01220	Тумба с 3-мя выдвижными ящиками	500	500	450	40
1-01230	Тумба с 4-мя выдвижными ящиками	500	500	600	40
1-01232	Тумба с 4-мя выдвижными ящиками	1200	500	600	90
1-01240	Тумба двухсекционная с полкой, 2 дверцы	1200	500	600	70
1-01250	Тумба двухсекционная с полкой, 2 дверцы	1400	500	600	80
1-01234	Тумба с 4-мя выдвижными ящиками	1400	500	600	100
1-01260	Тумба для хранения емкости (левая дверца)	500	500	600	40
1-01270	Тумба для хранения емкости (правая дверца)	500	500	600	40
1-01300	Тумба с полкой (левая дверца)	500	500	600	40
1-01310	Тумба с полкой (правая дверца)	500	500	600	40

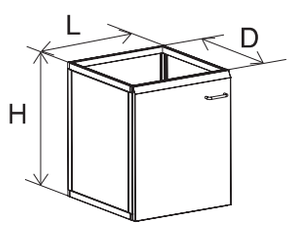

ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Артикул	Наименование
1-00050	Раковина Durcon с краном для воды, жесткой подводкой и фановой трубой 1000 мм
1-00070	Раковина полипропиленовая с краном для воды, жесткой подводкой и фановой трубой 1000 мм
1-00090	Кран для сжатого воздуха с гибкой подводкой 800 мм
1-00100	Кран для газа с гибкой подводкой 800 мм
1-00110	Мойка для глаз с гибкой подводкой 1500 мм
1-35340	Сервисная стойка на 5 розеток
1-00130	Поддоны для реактивов, полипропилен, 10 шт.

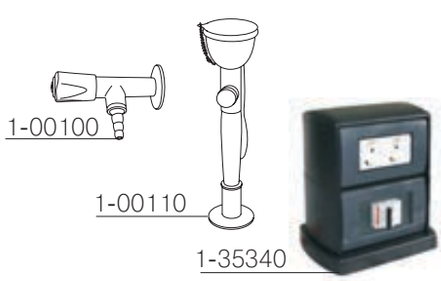

Подробнее о **ПОДВЕСНЫХ ТУМБАХ** смотрите на странице 14.

Подробнее о **РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ** смотрите на страницах 6 – 9.

Подробнее о **КОММУНИКАЦИЯХ** (электрических, сантехнических, газовых) смотрите на страницах 10 – 11.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Для обеспечения долговечности и надежности коммуникации в мебели EUROMAX выполнены из медных трубок.


EUROMAX
ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ


СТОЛЫ ТОРЦЕВЫЕ


Предназначены для создания рабочих мест, располагающихся в центре лаборатории.

Могут использоваться в качестве составной части островного комплекта или самостоятельно. Два торцевых стола позволяют смонтировать восьмиугольный островной комплект.



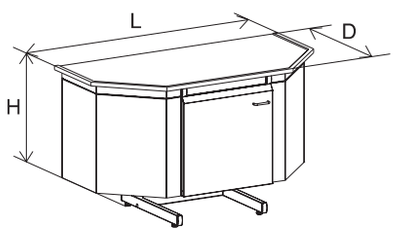

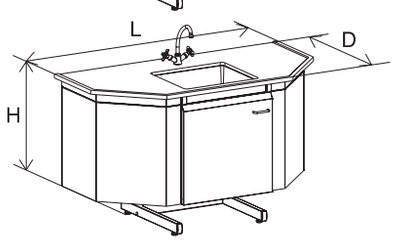

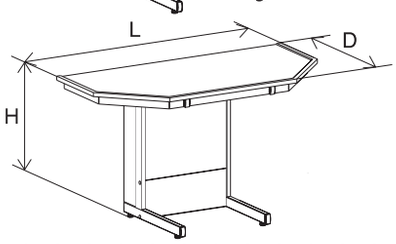

СТОЛЫ ТОРЦЕВЫЕ


Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-01120	1500	800	900	ламинат	100
1-01130	1500	800	900	LabGrade	100
1-01140	1500	800	900	Durcon	110
1-01160	1500	800	900	Durcon с бортиком	110
1-01145	1500	800	900	Quarella	110

СТОЛЫ ТОРЦЕВЫЕ С МОЙКОЙ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина раковины, мм	Рабочая поверхность	Материал раковины	Вес, не более, кг
1-01210	1500	800	900	140	LabGrade	нерж. сталь	90
1-01180	1500	800	900	280	LabGrade	Durcon	120
1-01190	1500	800	900	280	Durcon	Durcon	130
1-01170	1500	800	900	280	Durcon с бортиком	Durcon	130
1-01185	1500	800	900	280	Quarella	Durcon	130

СТОЛЫ ТОРЦЕВЫЕ БЕЗ ТУМБ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-01125	1500	800	900	ламинат	75
1-01135	1500	800	900	LabGrade	75
1-01144	1500	800	900	Durcon	75
1-01165	1500	800	900	Durcon с бортиком	80
1-01146	1500	800	900	Quarella	80

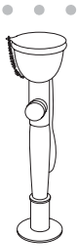

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ СТОЛОВ

Артикул	Наименование
1-00110	Мойка для глаз с гибкой подводкой 1500 мм

Подробнее о **ПОДВЕСНЫХ ТУМБАХ** смотрите на странице 14.

Подробнее о **РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ** смотрите на страницах 6 – 9.

Подробнее о **КОММУНИКАЦИЯХ** (электрических, сантехнических, газовых) смотрите на страницах 10 – 11.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Мойка для глаз позволяет быстро промыть глаза при попадании веществ, способных вызвать химический ожог.

СТОЛЫ-МОЙКИ


Предназначены для мытья лабораторной посуды и составных частей лабораторных установок и аппаратов.

Столы-мойки могут быть использованы при создании пристенных и островных комплектов столов. Все столы-мойки комплектуются подвесными тумбами, смесителями, системами подвода и слива воды.




СТОЛЫ-МОЙКИ 1200 ММ С ОДНОЙ РАКОВИНОЙ

Артикул	Д×Ш×В, мм	Глубина раковины, мм	Рабочая поверхность	Материал раковины	Примечание	Вес, не более, кг
1-00770	1200×750×900	140	LabGrade	нерж. сталь	мойка слева	80
1-00710	1200×750×900	280	LabGrade	Durcon	мойка слева	90
1-00720	1200×750×900	280	Durcon	Durcon	мойка слева	100
1-00790	1200×750×900	280	Durcon с бортиком	Durcon	мойка слева	100
1-00870	1200×750×900	140	LabGrade	нерж. сталь	мойка справа	80
1-00810	1200×750×900	280	LabGrade	Durcon	мойка справа	90
1-00820	1200×750×900	280	Durcon	Durcon	мойка справа	100
1-00890	1200×750×900	280	Durcon с бортиком	Durcon	мойка справа	100

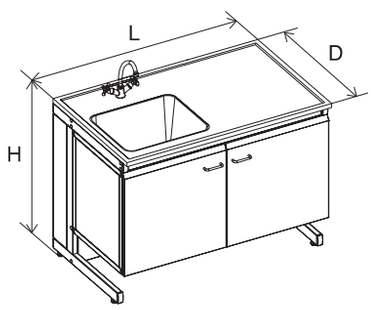


СТОЛЫ-МОЙКИ 1400 ММ С ОДНОЙ РАКОВИНОЙ

Артикул	Д×Ш×В, мм	Глубина раковины, мм	Рабочая поверхность	Материал раковины	Примечание	Вес, не более, кг
1-00780	1400×750×900	140	LabGrade	нерж. сталь	мойка слева	90
1-00730	1400×750×900	280	LabGrade	Durcon	мойка слева	110
1-00740	1400×750×900	280	Durcon	Durcon	мойка слева	120
1-00800	1400×750×900	280	Durcon с бортиком	Durcon	мойка слева	120
1-00880	1400×750×900	140	LabGrade	нерж. сталь	мойка справа	90
1-00830	1400×750×900	280	LabGrade	Durcon	мойка справа	110
1-00840	1400×750×900	280	Durcon	Durcon	мойка справа	120
1-00900	1400×750×900	280	Durcon с бортиком	Durcon	мойка справа	120

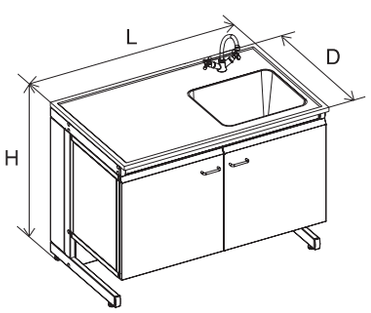


СТОЛЫ-МОЙКИ 1200 ММ С ДВУМЯ РАКОВИНАМИ

Артикул	Д×Ш×В, мм	Глубина раковины, мм	Рабочая поверхность	Материал раковины	Примечание	Вес, не более, кг
1-00970	1200×750×900	140	LabGrade	нерж. сталь	один смеситель	75
1-00910	1200×750×900	280	LabGrade	Durcon	один смеситель	90
1-00920	1200×750×900	280	Durcon	Durcon	один смеситель	100
1-00990	1200×750×900	280	Durcon с бортиком	Durcon	один смеситель	100
1-01090	1200×750×900	140	LabGrade	нерж. сталь	два смесителя	75
1-01030	1200×750×900	280	LabGrade	Durcon	два смесителя	90
1-01040	1200×750×900	280	Durcon	Durcon	два смесителя	100
1-01010	1200×750×900	280	Durcon с бортиком	Durcon	два смесителя	100

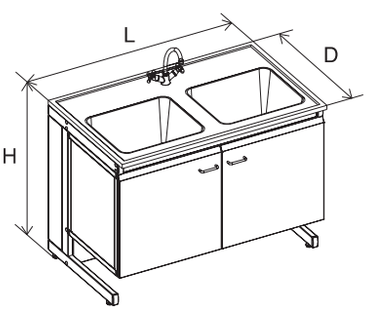


EUROMAX
ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

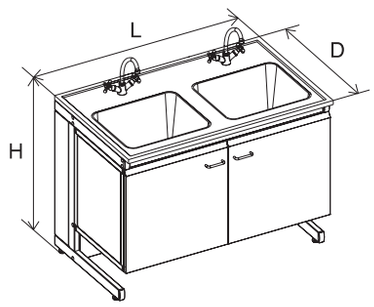

СТОЛЫ-МОЙКИ 1400 ММ С ДВУМЯ РАКОВИНАМИ

Артикул	Д×Ш×В, мм	Глубина раковины, мм	Рабочая поверхность	Материал раковины	Примечание	Вес, не более, кг
1-00980	1400×750×900	140	LabGrade	нерж. сталь	один смеситель	85
1-00930	1400×750×900	280	LabGrade	Durcon	один смеситель	100
1-00940	1400×750×900	280	Durcon	Durcon	один смеситель	110
1-01000	1400×750×900	280	Durcon с бортиком	Durcon	один смеситель	110
1-01100	1400×750×900	140	LabGrade	нерж. сталь	два смесителя	85
1-01050	1400×750×900	280	LabGrade	Durcon	два смесителя	100
1-01060	1400×750×900	280	Durcon	Durcon	два смесителя	110
1-01020	1400×750×900	280	Durcon с бортиком	Durcon	два смесителя	110

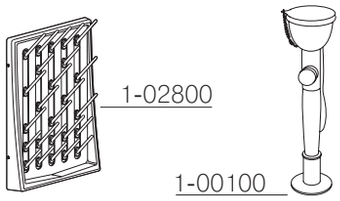

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТОЛОВ-МОЕК

Артикул	Наименование
1-00110	Мойка для глаз с гибкой подводкой 1500 мм
1-02800	Сушилка настенная для посуды

СТОЛЫ ВЕСОВЫЕ


Предназначены для размещения весоизмерительной техники.

Конструктивные особенности весовых столов позволяют эффективно гасить вибрацию в процессе взвешивания, что обеспечивает отличную воспроизводимость результатов измерений.




СТОЛЫ ВЕСОВЫЕ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-00140	1200	750	750	гранит, ламинат	170
1-00150	1200	750	750	гранит, LabGrade	170
1-00160	1200	750	900	гранит, ламинат	180
1-00170	1200	750	900	гранит, LabGrade	180
1-00180	1400	750	750	гранит, ламинат	190
1-00190	1400	750	750	гранит, LabGrade	190
1-00200	1400	750	900	гранит, ламинат	200
1-00210	1400	750	900	гранит, LabGrade	200

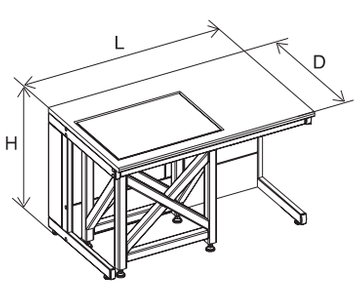

СТОЛЫ ВЕСОВЫЕ МАЛЫЕ


Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-00220	630	450	750	гранит	100
1-00225	630	450	900	гранит	105

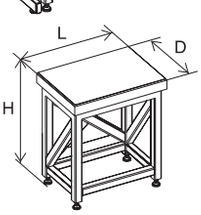

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТУМБЫ ПОДВЕСНЫЕ

Артикул	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, не более, кг
1-01220	Тумба с 3 выдвижными ящиками	500	500	450	40
1-01230	Тумба с 4 выдвижными ящиками	500	500	600	40
1-01270	Тумба для хранения емкости (правая дверца)	500	500	600	40
1-01310	Тумба с полкой (правая дверца)	500	500	600	40

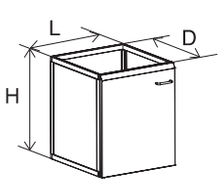


УСТАНОВКИ ТИТРОВАЛЬНЫЕ

Позволяют облегчить и упростить выполнение титриметрических анализов при ручном титровании растворов.

- Установки оснащены матовым экраном с подсветкой и пятью штативами для бюреток.
- В стандартную комплектацию входят 10 полипропиленовых зажимов для бюреток, четыре люминесцентные лампы PHILIPS, короб с двойной розеткой, автоматом отключения питания и выключателем.
- Титровальные установки могут использоваться при создании островных комплектов столов.




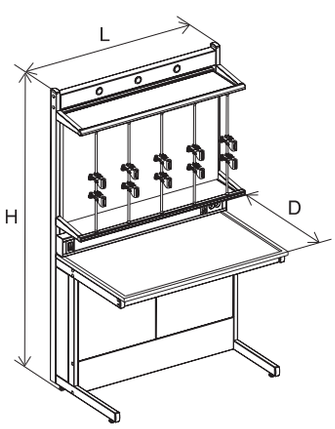

УСТАНОВКИ ТИТРОВАЛЬНЫЕ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Высота экрана, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-01320	1200	750	1990	1090	ламинат	120
1-01330	1200	750	1990	1090	керамика	120
1-01340	1200	750	1990	1090	LabGrade	120
1-01350	1200	750	1990	1090	Durcon	130
1-01370	1200	750	1990	1090	Durcon с бортиком	130
1-01335	1200	750	1990	1090	Quarella	130

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

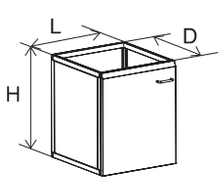

ТУМБЫ ПОДВЕСНЫЕ

Артикул	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, не более, кг
1-01220	Тумба с 3 выдвижными ящиками	500	500	450	40
1-01230	Тумба с 4 выдвижными ящиками	500	500	600	40
1-01232	Тумба с 4 выдвижными ящиками	1200	500	600	90
1-01240	Тумба двухсекционная с полкой, 2 дверцы	1200	500	600	70
1-01260	Тумба для хранения емкости (левая дверца)	500	500	600	40
1-01270	Тумба для хранения емкости (правая дверца)	500	500	600	40
1-01300	Тумба с полкой (левая дверца)	500	500	600	40
1-01310	Тумба с полкой (правая дверца)	500	500	600	40

Подробнее о **ПОДВЕСНЫХ ТУМБАХ** смотрите на странице 14.

Подробнее о **РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ** смотрите на страницах 6 – 9.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Для уменьшения шума дверцы подвесных тумб заполнены специальным звукопоглощающим материалом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Каркас стола представляет собой прочную металлоконструкцию, покрытую белой порошковой эпоксиполиэфирной краской.





ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ EUROMAX

Вытяжные шкафы предназначены для решения разнообразных задач, связанных с использованием в лаборатории опасных и токсичных веществ. Выбор нужной модели шкафа зависит от характера выполняемых работ и типа используемых химических веществ.

Шкафы серии EUROMAX оснащены вентилируемыми металлическими тумбами для хранения сыпучих химических реактивов и неагрессивных жидкостей.

Для хранения кислот используются металлические тумбы со специальными полиэтиленовыми вставками, которые защищают внутреннюю поверхность тумб от коррозии.

Вытяжные шкафы серии EUROMAX разработаны с учетом европейских требований стандартов DIN и BS.

EUROMAX
ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ ШКАФОВ

Вытяжные шкафы представляют собой сборную металлическую конструкцию и поставляются в виде двух отдельных модулей — верхней и нижней части.


ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ

Металлический корпус с порошковым покрытием представляет собой жесткую конструкцию, защищенную от коррозии эпоксиполиэфирной порошковой краской DUPONT.

Панель управления с выключателями «СВЕТ», «ВЕНТИЛЯТОР» и индикацией электропитания.

Патрубок для подключения к вентиляции диаметром 200 мм.

Рабочая зона выполнена либо из металла, либо из пластика, что определяет назначение вытяжного шкафа. Правильный выбор модели обеспечит удобство в работе, безопасность и долгий срок службы изделия.

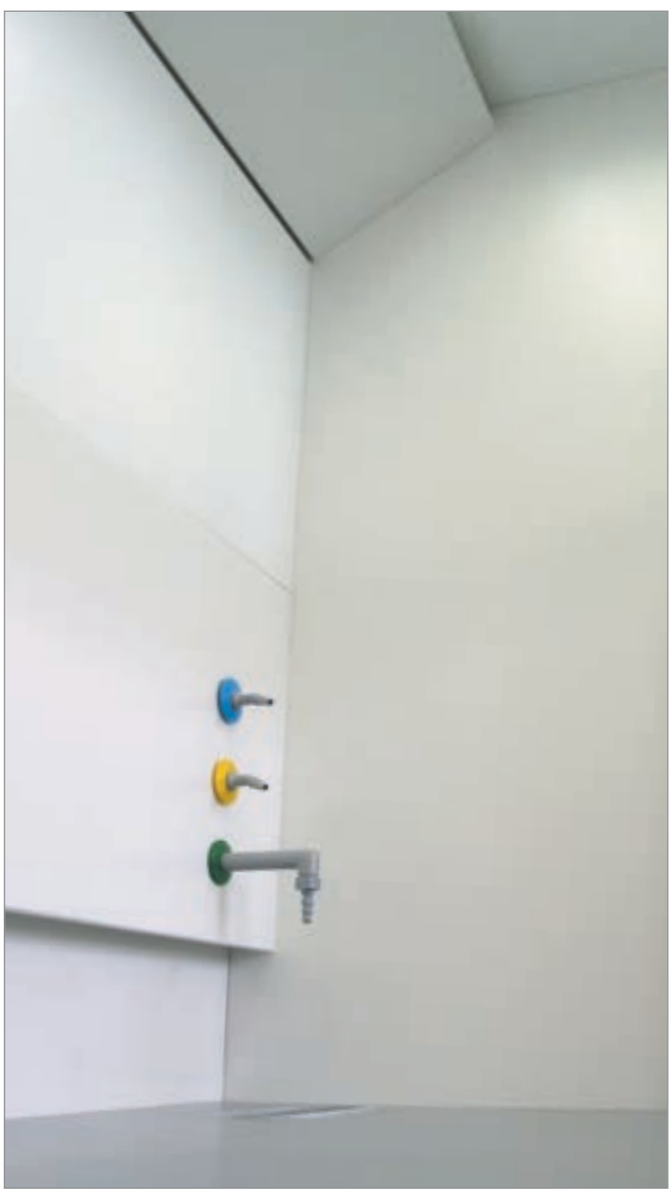

В металлических вытяжных шкафах рабочая камера выполнена из стали с эпоксиполиэфирным покрытием или из нержавеющей стали с повышенной коррозионной стойкостью.



В пластиковых вытяжных шкафах рабочая камера изготавливается из стеклокомпозита на основе бисфенольной эпоксивинилэфирной смолы или стали, оклеенной листами поливинилхлорида.

Подробнее о **ВСТРОЕННЫХ ТУМБАХ** смотрите на странице 31.

Подробнее о **РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ** смотрите на страницах 6 – 9.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Вытяжные шкафы серии EUROMAX комплектуются встроенными тумбами, кроме шкафа для установок большой высоты.
Тумба с вытяжкой поставляется в кислотостойком исполнении.
Внутренняя камера тумбы облицована листами из ПВХ, защищающими тумбу от коррозии.

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ И ФИТИНГИ

Химически стойкие рабочие поверхности вытяжных шкафов изготавливаются из эпоксидного композита или керамической плитки. Эпоксидный композит, в отличие от керамики, не имеет швов и более устойчив к механическим нагрузкам.



Эпоксидный композит Durcon с бортиком и овальной сливной раковиной Durcon (модель CS12), либо большие мойки Durcon (модель L30) (для шкафов с мойкой).



Керамическая плитка с круглой раковиной из полипропилена.

При сборке вытяжных шкафов используются краны, трубки и фитинги, обеспечивающие надежность всех соединений и исключающие утечки. В дополнительной комплектации вытяжного шкафа могут быть предусмотрены: кран для холодной воды, кран для газа, кран для сжатого воздуха.



В вытяжных шкафах серии EUROMAX (высота 2400 мм) краны оборудованы дистанционными вентилями, расположенными на нижней лицевой панели вне рабочей зоны.



В вытяжных шкафах серии EUROMINI (высота 2100 мм) вентили расположены непосредственно на кранах в рабочей зоне шкафа.



Водная, газовая и воздушная разводка расположена на задней стенке шкафа и выполнена из медных трубок со стандартными резьбовыми фитингами (1/2 дюйма).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Панель управления позволяет контролировать электроснабжение шкафа: освещение рабочей зоны, работу вентилятора. Дистанционные краны позволяют включать воду в вытяжном шкафу, не проникая в рабочую зону.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Подводка воды и газа осуществляется только жесткими трубами, что позволяет выдерживать большие перепады давления и делает соединения более надежными, исключая утечки газа или воды.







Подъемный механизм находится в левой части портала. Все детали механизма (груз, трос, ролики, крепеж) доступны для обслуживания и ремонта непосредственно с фронтальной части шкафа. Это важно, если шкаф находится в углу, либо расположен в один ряд с другими шкафами.

- Стальной трос расположен вне рабочей зоны, что защищает его от коррозии.
- Ролики из полипропилена обеспечивают долгий срок эксплуатации механизма.
- Стальной груз расположен в металлических направляющих и может фиксироваться на любой высоте.

Подъемный защитный экран из закаленного стекла оборудован удобной длинной ручкой. Для предотвращения коррозии ручка покрыта черным пластиком.

Люминесцентный светильник обеспечивает отличное освещение рабочей зоны.

- Один светильник (2×18 Вт) для шкафов шириной 1200 мм.
- Два светильника (2×18 Вт) для шкафов шириной 1500 и 1800 мм.
- Взрывобезопасный светильник и выключатель (только в шкафах во взрывобезопасном исполнении).
- Светильник отсутствует в шкафах, предназначенных для мытья посуды.

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ

Металлическое основание со встроенными тумбами обеспечивает устойчивость шкафа и жесткость всей конструкции.

Электрооборудование расположено в левой части лицевой панели (отсутствует в шкафах с большими раковинами, предназначенных для мытья посуды). Степень защиты от поражения электрическим током относится к классу I согласно ГОСТ 12.2.007.075.

- Выключатели электропитания.
- Система автоматического отключения питания УЗО.
- Три розетки 220 В в брызгозащитном исполнении.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В специальных взрывозащищенных шкафах используются светильники и выключатели во взрывобезопасном исполнении.



Светильник ВБП

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Даже при закрытом экране вытяжка из рабочей зоны осуществляется благодаря системе «BY-PASS», которая соответствует требованиям DIN 12924, BS 7258.



ВСТРОЕННЫЕ ТУМБЫ

Встроенные тумбы могут быть выполнены либо из металла, либо из металла с пластиковой вставкой. Выбор тумбы зависит от типа хранящихся веществ.



Поверхность металлических встроенных тумб покрыта эпоксиполиэфирной краской. Тумбы оборудованы выдвигаемыми металлическими поддонами.

Назначение: хранение ЛВЖ и веществ, не вызывающих коррозию.



Тумба с пластиковой вставкой имеет внутри цельную капсулу из полиэтилена и полку из слоистого пластика. В рабочей зоне тумбы отсутствуют металлические детали.

Назначение: хранение агрессивных веществ, в том числе минеральных кислот.


ПРИНЦИП ВЫТЯЖКИ

В металлических вытяжных шкафах и вытяжных шкафах с ПВХ облицовкой задний экран рабочей камеры неподвижен и формирует равномерный по высоте воздушный поток.

В вытяжных шкафах с рабочей камерой из стеклокомпозита задний экран рабочей камеры может переставляться в верхнее (для работы с веществами тяжелее воздуха), нижнее (для работы с веществами легче воздуха) и среднее (стандартный вариант) положение.

При поднятом переднем защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону вытяжного шкафа через весь рабочий проем. При опущенном переднем защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS», которая соответствует требованиям DIN 12924, BS 7258.

Встроенные тумбы имеют эффективную систему вытяжки, не зависящую от вытяжки в рабочей зоне верхней части шкафа. Вентилируемые отсеки встроенных тумб подключаются непосредственно к воздуховоду коробами из ПВХ.

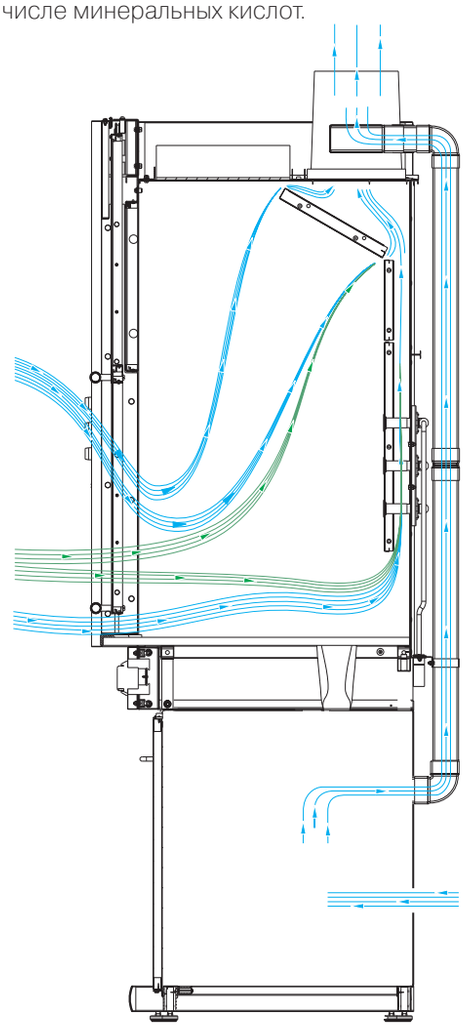

EUROMAX
ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Статическое давление, создаваемое вытяжным вентилятором, обуславливает движение воздуха в вентиляционной системе. Чем больше потеря давления в вытяжном шкафу, тем эффективнее удаляются из него вредные газы и вещества.

Условия измерения ΔP: высота проема 0,2 м, минимальная скорость воздуха 1,2 м/с.

Для тестов использовались:

- вентилятор ROSENBERG RS 315L ΔP вентилятора = 300 Па при V=1000 м³/ч;
- монитор воздушного потока AFA 1000 с сенсором SM 5, калибровка по стандарту BS 7258.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ВЫТЯЖНЫХ ШКАФАХ

Типы шкафов	EUROMINI 1200	EUROMAX 1200	EUROMAX 1500
Потеря давления ΔP, Па	150	110	140

КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Насколько эффективно вентиляция вытяжного шкафа справляется с удалением вредных веществ из рабочей зоны? Можно ли быть уверенным в собственной безопасности и безопасности окружающих?

Монитор воздушного потока МВП 001 устанавливается в вытяжных шкафах серий EUROMINI и EUROMAX. Он предназначен для своевременного предупреждения персонала о возможной опасности при малой скорости воздушного потока, удаляемого из вытяжного шкафа.

Монитор МВП 001 оснащен сенсором, который измеряет линейную скорость воздуха (м/сек) в вытяжном шкафу. Данные обрабатываются микропроцессором и отображаются на ЖК дисплее, расположенном на лицевой панели шкафа.

Дополнительно монитор оснащен системой оперативного оповещения — сигнальными индикаторами.

Зеленый — сигнализирует о том, что линейная скорость воздушного потока соответствует нормальной.
Красный — сигнализирует о критически низком значении линейной скорости и о том, что вытяжка функционирует недостаточно эффективно.

Монитор МВП 001 имеет стандартную заводскую калибровку, но может быть настроен и по специальным требованиям заказчика. В стандартном исполнении калибровка монитора соответствует рекомендациям SEFA (Scientific Equipment and Furniture Association) и согласуется с BS (British Standard) 7258, Part 1.



СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ В ВОЗДУХОВОДАХ (СПРПВ)

Принцип действия

В рабочей камере вытяжного шкафа (на потолке) установлен УФ-датчик, который фиксирует появление искры или открытого пламени. Информация о возгорании поступает в процессор монитора воздушного потока МВП 001, который выдает команду на снятие напряжения привода воздушной заслонки (демпера), установленной в патрубке вытяжного шкафа.

В течение 3 секунд демпер перекрывает всю площадь вентиляционного канала, одновременно прекращая тягу в рабочей камере и тумбах шкафа, и закрывает таким образом пламени доступ в систему лабораторной вентиляции.

На индикатор монитора выводится сообщение «FL» (от английского «Flame»-пламя) и мигает красный светодиод.

Система может быть установлена на любой вытяжной шкаф (кроме ВЗБ), изготовленный после 2009 года.








Датчик открытого пламени, устанавливается на потолке внутреннего корпуса

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ
ОКРАШЕННАЯ СТАЛЬ

Предназначены для обеспечения безопасных для здоровья персонала условий при проведении пробоподготовки, выполнении анализов, а также при работе с приборами и установками для органического синтеза.

Вытяжные шкафы с большим стеклянным проемом и рабочей зоной, выполненной из стали, покрытой порошковой краской.

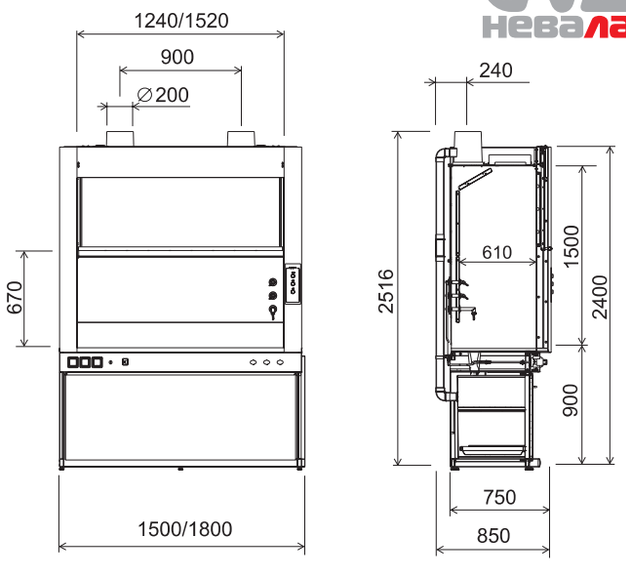

Рабочая зона — окрашенная сталь:


- химически устойчива;
- легко моется;
- пожаробезопасна.


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Розетка 220 В	3 шт.
Выключатель	1 шт.
Автомат УЗО 16 А	1 шт.
Светильник, 2×18 Вт	2 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Артикул	Наименование
1-00055	Раковина Durcon с краном дистанционным для воды, жесткой подводкой и фановой трубой
1-00071	Раковина полипропиленовая с краном дистанционным для воды, жесткой подводкой и фановой трубой
1-00101	Кран дистанционный для газа
1-00095	Кран дистанционный для воздуха

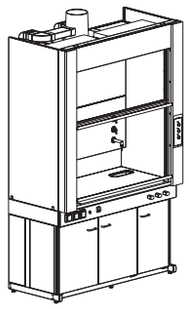

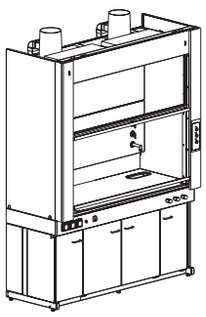

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ШИРИНОЙ 1200 ММ. ОКРАШЕННАЯ СТАЛЬ

Артикул	Д×Ш×В, мм	Глубина рабочей зоны, мм	Высота столешницы, мм	Рабочая поверхность	Материал зоны хранения тумбы	Вес, не более, кг
1-01890	1200×750×2400	610	900	нерж. сталь	окрашенный металл	400
1-01900	1200×750×2400	610	900	нерж. сталь	полиэтилен	400
1-01850	1200×750×2400	610	900	Durcon	окрашенный металл	400
1-01860	1200×750×2400	610	900	Durcon	полиэтилен	400
1-01870	1200×750×2400	610	900	керамика	окрашенный металл	400
1-01880	1200×750×2400	610	900	керамика	полиэтилен	400

Ширина 750 мм указана без учета размера вытяжного короба (см. чертеж).

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ШИРИНОЙ 1500 ММ. ОКРАШЕННАЯ СТАЛЬ

Артикул	Д×Ш×В, мм	Глубина рабочей зоны, мм	Высота столешницы, мм	Рабочая поверхность	Материал зоны хранения тумбы	Вес, не более, кг
1-01955	1500×750×2400	610	900	нерж. сталь	окрашенный металл	440
1-01956	1500×750×2400	610	900	нерж. сталь	полиэтилен	440
1-01910	1500×750×2400	610	900	Durcon	окрашенный металл	440
1-01920	1500×750×2400	610	900	Durcon	полиэтилен	440
1-01930	1500×750×2400	610	900	керамика	окрашенный металл	440
1-01950	1500×750×2400	610	900	керамика	полиэтилен	440

Ширина 750 мм указана без учета размера вытяжного короба (см. чертеж).
Расположение тумб: с левой стороны расположены 2 отсека с вытяжкой, с правой — сервисный отсек.

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ШИРИНОЙ 1800 ММ. ОКРАШЕННАЯ СТАЛЬ

Артикул	Д×Ш×В, мм	Глубина рабочей зоны, мм	Высота столешницы, мм	Рабочая поверхность	Материал зоны хранения тумбы	Вес, не более, кг
1-01975	1800×750×2400	610	900	нерж. сталь	окрашенный металл	470
1-01985	1800×750×2400	610	900	нерж. сталь	полиэтилен	470
1-01960	1800×750×2400	610	900	Durcon	окрашенный металл	470
1-01970	1800×750×2400	610	900	Durcon	полиэтилен	470
1-01980	1800×750×2400	610	900	керамика	окрашенный металл	470
1-01990	1800×750×2400	610	900	керамика	полиэтилен	470

Ширина 750 мм указана без учета размера вытяжного короба (см. чертеж).
Расположение тумб: в центре расположены 2 отсека с вытяжкой, с правой и левой — сервисные отсеки.

Подробнее о **ВСТРОЕННЫХ ТУМБАХ** смотрите на странице 31.

Подробнее о **РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ** смотрите на страницах 6 – 9.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Внешний корпус и внутренний корпус шкафов этого типа выполнен из стали, покрытой эпоксидной порошковой краской.


EUROMAX
ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЛЯ УСТАНОВОК БОЛЬШОЙ ВЫСОТЫ

ОКРАШЕННАЯ СТАЛЬ

Предназначен для размещения в хорошо вентилируемой зоне аппаратов и установок большой высоты.

Вытяжной шкаф был специально разработан для лабораторий, проводящих анализ нефти на содержание парафинов согласно требованиям ГОСТ 11851-85 «Нефть. Метод определения парафина».

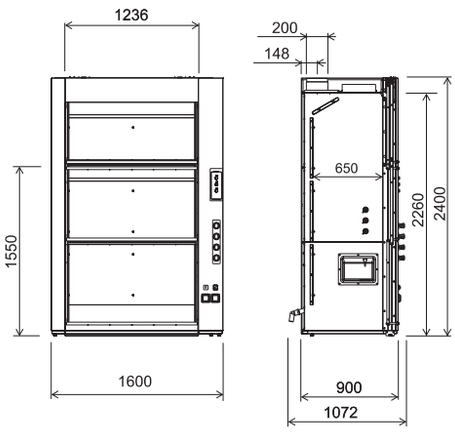


Рабочая зона — окрашенная сталь:

- химически устойчива;
- легко моется;
- пожаробезопасна.

- Два подъемных экрана из закаленного стекла обеспечивают доступ в рабочую зону шкафа до высоты 1550 мм. Верхний экран с раздвижными дверцами из закаленного стекла обеспечивает доступ в рабочую зону от высоты 1550 до 2200 мм.
- Рабочая зона шкафа выполнена из стали с эпоксиполиэфирным покрытием.
- На задней стенке расположена штативная сетка для монтажа и крепления аппаратов и установок. Полипропиленовая сливная раковина установлена в правой стенке шкафа в кислотостойкой нише из полистирола и не выступает за границу рабочей зоны.
- Освещение рабочей зоны обеспечивается двумя люминесцентными светильниками.
- В случае необходимости размещения приборов и оборудования в рабочей зоне, например, комплекта для выполнения работ по ГОСТ 11851-85 «Определение парафинов в нефти», шкаф может быть укомплектован передвижным столом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Кран для вакуума	1 шт.
Кран для воды	1 шт.
Кран для газа	1 шт.
Кран для воздуха	1 шт.
Раковина сливная	1 шт.
Штатив настенный из нерж. стали	1 шт.
Розетка 220 В	2 шт.
Выключатель	1 шт.
Автомат УЗО 16 А	1 шт.
Светильник, 2×18 Вт	2 шт.

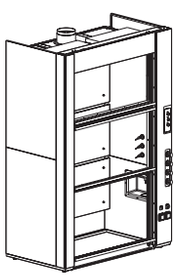



ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЛЯ УСТАНОВОК БОЛЬШОЙ ВЫСОТЫ. ОКРАШЕННАЯ СТАЛЬ

Артикул	Д×Ш×В, мм	Глубина рабочей зоны, мм	Материал раковины	Вес, не более, кг
1-01940	1600×900×2400	650	полипропилен	300

СТОЛ ПРИБОРНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ

Артикул	Д×Ш×В, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-02945	800×600×450	LabGrade/LabGrade	30
1-02940	800×600×900	LabGrade/LabGrade	30
1-02950	800×600×900	Durcon/LabGrade	30

СПЕКТРОФОТОМЕТР ДЛЯ АНАЛИЗА ВОДЫ LOVIBOND® SPECTRODIRECT

Спектрофотометр SpectroDirect предназначен для использования в промышленных и аналитических лабораториях, в которых проводится контроль состава питьевых, природных и сточных вод. Спектрофотометр подходит практически для всех отечественных спектрофотометрических методик и, благодаря наличию фирменных методик, использующих расходные материалы Lovibond®, позволяет на порядок сократить время анализов и количество ошибок. Все основные фирменные методики сертифицированы в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 5725 и ГОСТ Р 8.563-96 и внесены в Государственный реестр РФ.


- Диапазон от 330 до 900 нм
- Большой графический дисплей
- Мембранная клавиатура
- Прямоугольные и круглые кюветы различного размера устанавливаются без адаптеров
- Свыше 20 пользовательских методов
- Запрограммированные методы Lovibond® внесены в Государственный реестр РФ



Lovibond®

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Вытяжные шкафы с рабочей зоной, выполненной из нержавеющей стали, предназначены для работы с легко воспламеняющимися жидкостями и другими химическими веществами, не вызывающими коррозию.

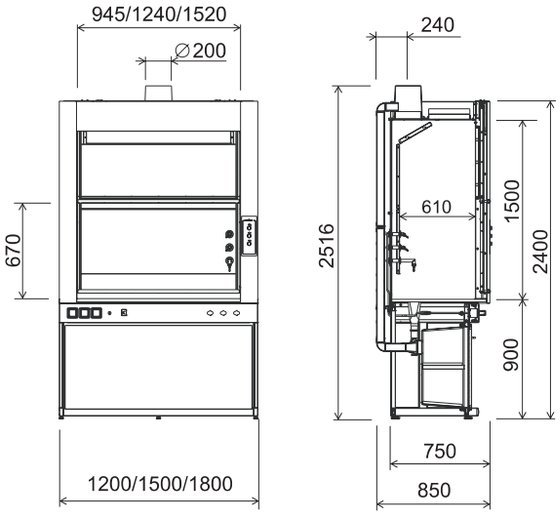

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


Розетка 220 В	3 шт.
Выключатель	1 шт.
Автомат УЗО 16 А	1 шт.
Светильник, 2×18 Вт (1200 мм)	1 шт.
Светильник, 2×18 Вт (1500 мм)	2 шт.


Рабочая зона — нержавеющая сталь:


- химически устойчива;
- легко моется;
- пожаробезопасна.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Артикул	Наименование
1-00055	Раковина Durcon с краном дистанционным для воды, жесткой подводкой и фановой трубой
1-00071	Раковина полипропиленовая с краном дистанционным для воды, жесткой подводкой и фановой трубой
1-00101	Кран дистанционный для газа
1-00095	Кран дистанционный для воздуха

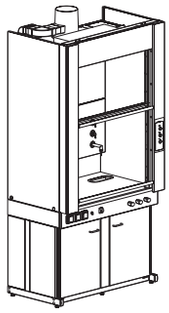

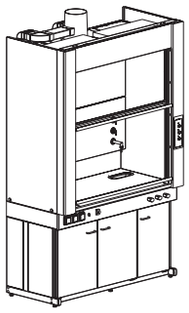

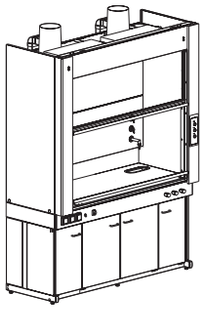

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ШИРИНОЙ 1200 ММ. НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Артикул	Д×Ш×В, мм	Глубина рабочей зоны, мм	Высота столешницы, мм	Глубина раковины, мм	Рабочая поверхность	Материал зоны хранения тумбы	Вес, не более, кг
1-01715	1200×750×2400	610	900	180	Durcon	окрашенный металл	400
1-01710	1200×750×2400	610	900	180	керамика	окрашенный металл	400
1-01711	1200×750×2400	610	900	180	нерж. сталь	окрашенный металл	400
1-01725	1200×750×2400	610	900	180	Durcon	полиэтилен	400
1-01720	1200×750×2400	610	900	180	керамика	полиэтилен	400
1-01721	1200×750×2400	610	900	180	нерж. сталь	полиэтилен	400

Ширина 750 мм указана без учета размера вытяжного короба (см. чертеж).
Расположение тумб: с левой стороны расположен отсек с вытяжкой, с правой — сервисный отсек.

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ШИРИНОЙ 1500 ММ. НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Артикул	Д×Ш×В, мм	Глубина рабочей зоны, мм	Высота столешницы, мм	Глубина раковины, мм	Рабочая поверхность	Материал зоны хранения тумбы	Вес, не более, кг
1-01735	1500×750×2400	610	900	180	Durcon	окрашенный металл	440
1-01730	1500×750×2400	610	900	180	керамика	окрашенный металл	440
1-01731	1500×750×2400	610	900	180	нерж. сталь	окрашенный металл	440
1-01745	1500×750×2400	610	900	180	Durcon	полиэтилен	440
1-01740	1500×750×2400	610	900	180	керамика	полиэтилен	440
1-01741	1500×750×2400	610	900	180	нерж. сталь	полиэтилен	440

Ширина 750 мм указана без учета размера вытяжного короба (см. чертеж).
Расположение тумб: с левой стороны расположены 2 отсека с вытяжкой, с правой — сервисный отсек.

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ШИРИНОЙ 1800 ММ. НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Артикул	Д×Ш×В, мм	Глубина рабочей зоны, мм	Высота столешницы, мм	Глубина раковины, мм	Рабочая поверхность	Материал зоны хранения тумбы	Вес, не более, кг
1-01755	1800×750×2400	610	900	180	Durcon	окрашенный металл	470
1-01750	1800×750×2400	610	900	180	керамика	окрашенный металл	470
1-01751	1800×750×2400	610	900	180	нерж. сталь	окрашенный металл	470
1-01765	1800×750×2400	610	900	180	Durcon	полиэтилен	470
1-01760	1800×750×2400	610	900	180	керамика	полиэтилен	470
1-01761	1800×750×2400	610	900	180	нерж. сталь	полиэтилен	470


Ширина 750 мм указана без учета размера вытяжного короба (см. чертеж).
Расположение тумб: в центре расположены 2 отсека с вытяжкой, с правой и левой — сервисные отсеки.

EUROMAX
ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ С МОЙКАМИ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Вытяжные шкафы с раковинами для мытья лабораторной посуды и аппаратов из стекла.


Предназначены для работы с легко воспламеняющимися жидкостями, опасными химическими веществами и растворителями. Рабочая поверхность выполнена из слоистого пластика LabGrade или эпоксидного композита Durcon с бортиком. Шкафы комплектуются встроенными сервисными тумбами.

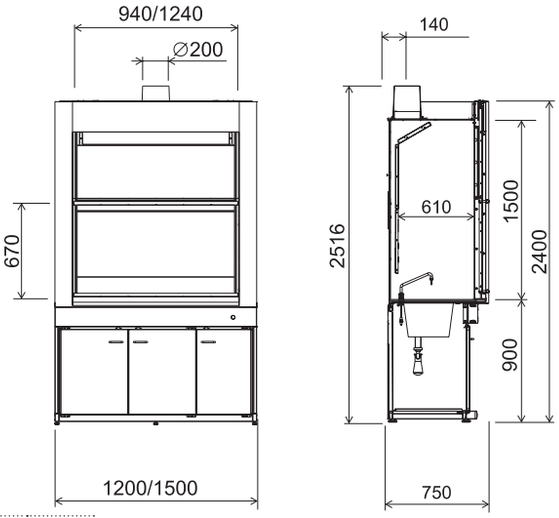

Рабочая зона — нержавеющая сталь:
- химически устойчива;
- легко моется;
- пожаробезопасна.


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Смеситель воды TOF	1 шт.
Раковина, модель L30	1 шт.

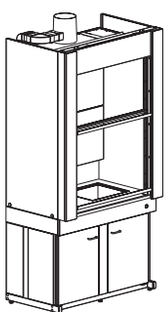

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ С МОЙКАМИ 1200 ММ. НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Артикул	Д×Ш×В, мм	Глубина рабочей зоны, мм	Высота столешницы, мм	Глубина раковины, мм	Рабочая поверхность	Материал раковины	Примечание	Вес, не более, кг
1-01914	1200×750×2400	610	900	280	Durcon	Durcon	одна раковина	400
1-01934	1200×750×2400	610	900	140	LabGrade	нерж. сталь	одна раковина	400

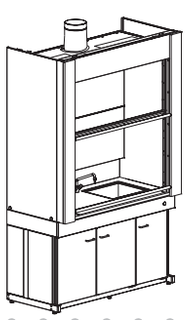

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ С МОЙКАМИ 1500 ММ. НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Артикул	Д×Ш×В, мм	Глубина рабочей зоны, мм	Высота столешницы, мм	Глубина раковины, мм	Рабочая поверхность	Материал раковины	Примечание	Вес, не более, кг
1-01915	1500×750×2400	610	900	280	Durcon	Durcon	одна раковина	440
1-01925	1500×750×2400	610	900	280	Durcon	Durcon	две раковины	440
1-01935	1500×750×2400	610	900	140	LabGrade	нерж. сталь	одна раковина	440
1-01945	1500×750×2400	610	900	140	LabGrade	нерж. сталь	две раковины	440



Подробнее о **РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ** смотрите на страницах 6 – 9.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Нержавеющая сталь кратковременно устойчива к воздействию растворов солей, концентрированных кислот и щелочей, а также устойчива к большинству органических растворителей.



НАБОРЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА

Наборы реагентов и аксессуаров для мобильного химического анализа (экспресс-анализа) производства фирмы MERCK позволяют оперативно получать точные результаты непосредственно на месте отбора пробы без использования специального лабораторного оборудования.

Наборы включают все необходимые для анализа реактивы и аксессуары, а также точные инструкции по применению и интерпретации результатов.

Фирма MERCK выпускает наборы для химического экспресс-анализа под торговыми марками: Aquamerck®, Aquaquant®, Merckoquant®, Reflectoquant®, Spectroquant®.

MERCK

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ


НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Предназначены для работы с веществами, способными образовывать взрывоопасную среду (в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.010-76).

Рабочая зона выполнена из нержавеющей стали — материала, не накапливающего при работе статическое электричество. Вытяжной шкаф оснащен взрывобезопасным светильником и выключателем.

Рабочая зона — нержавеющая сталь:

- химически устойчива;
- легко моется;
- пожаробезопасна.

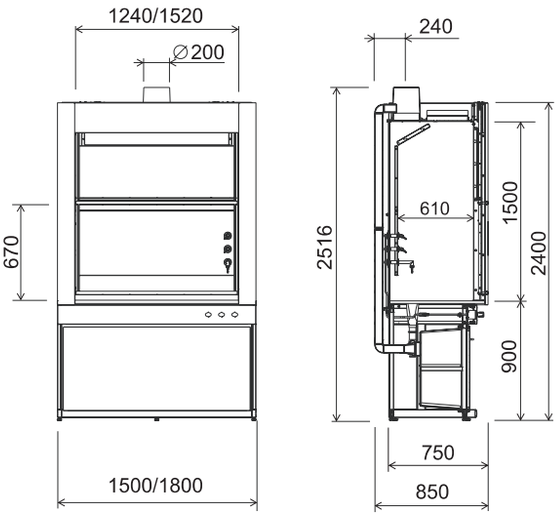


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Выключатель взрывобезопасный	1 шт.
Светильник взрывобезопасный	1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Артикул	Наименование
1-00055	Раковина Durcon с краном дистанционным для воды, жесткой подводкой и фановой трубой
1-00071	Раковина полипропиленовая с краном дистанционным для воды, жесткой подводкой и фановой трубой
1-00101	Кран дистанционный для газа
1-00095	Кран дистанционный для воздуха

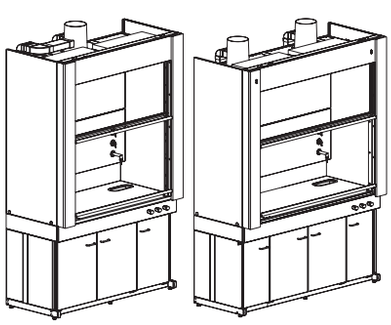

ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ. НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Артикул	Д×Ш×В, мм	Глубина рабочей зоны, мм	Высота столешницы, мм	Рабочая поверхность	Материал зоны хранения тумбы	Примечание	Вес, не более, кг
1-01520	1200×750×2400	610	900	Durcon	окрашенный металл	без подвода воды	400
1-01535	1200×750×2400	610	900	нерж. сталь	окрашенный металл	без подвода воды	400
1-01525	1200×750×2400	610	900	керамика	окрашенный металл	без подвода воды	400
1-01465	1500×750×2400	610	900	Durcon	окрашенный металл	без подвода воды	440
1-01475	1500×750×2400	610	900	керамика	окрашенный металл	без подвода воды	440
1-01485	1500×750×2400	610	900	нерж. сталь	окрашенный металл	без подвода воды	440
1-01490	1800×750×2400	610	900	Durcon	окрашенный металл	без подвода воды	470
1-01505	1800×750×2400	610	900	нерж. сталь	окрашенный металл	без подвода воды	470
1-01495	1800×750×2400	610	900	керамика	окрашенный металл	без подвода воды	470

Ширина 750 мм указана без учета размера вытяжного короба (см. чертеж).
Расположение тумб: в центре расположены 2 отсека с вытяжкой, с правой и левой — сервисные отсеки.

MERCK



ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ MERCK

Продукцию фирмы Merck KGaA отличает высокое качество и точное соответствие характеристик реактива всем параметрам, указанным в спецификации.

Компания Merck производит химреактивы высокой степени чистоты, индикаторы, чистые вещества для хроматографии, специальные растворители для спектроскопии Uvasol®, реагенты Apura® для титрования по методу Карла Фишера, наборы для экспресс-анализа Aquaquant®, Aquamerck®, Microquant®, Spectroquant® и Reflectoquant®, стандартные образцы Certipur® и многое другое.

EUROMAX
ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ С МОЙКАМИ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Вытяжные шкафы с раковинами для мытья лабораторной посуды и аппаратов из стекла предназначены для работы с веществами, способными образовывать взрывоопасную среду (в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.010-76).


Предназначены для работы с легко воспламеняющимися жидкостями, опасными химическими веществами и растворителями. Шкафы комплектуются мойками.

Рабочая зона — нержавеющая сталь:

- химически устойчива;
- легко моется;
- пожаробезопасна.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Смеситель воды TOF	1 шт.
Раковина, модель L30	1 шт.
Выключатель взрывобезопасный	1 шт.
Светильник взрывобезопасный	1 шт.

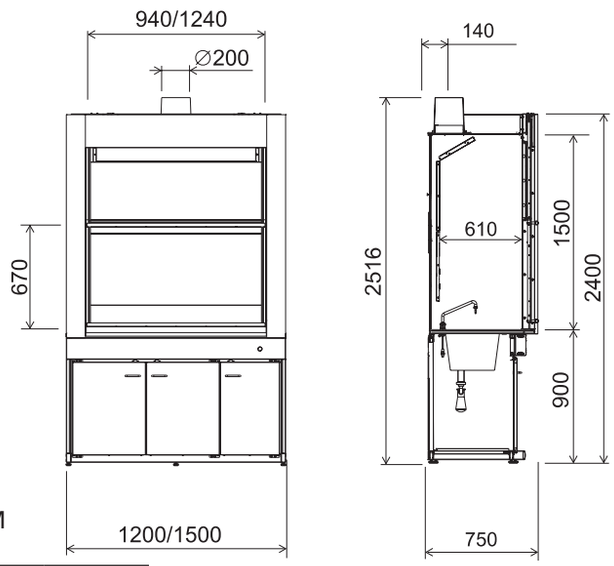


ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ С МОЙКАМИ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ 1200 ММ. НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Артикул	Д×Ш×В, мм	Глубина рабочей зоны, мм	Высота столешницы, мм	Глубина раковины, мм	Материал раковины	Примечание	Вес, не более, кг
1-20050	1200×750×2100	610	900	140	нерж. сталь	одна раковина	390
1-01605	1200×750×2400	610	900	280	Durcon	одна раковина	400
1-01615	1200×750×2400	610	900	140	нерж. сталь	одна раковина	400

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ С МОЙКАМИ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ 1500 ММ. НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Артикул	Д×Ш×В, мм	Глубина рабочей зоны, мм	Высота столешницы, мм	Глубина раковины, мм	Материал раковины	Примечание	Вес, не более, кг
1-01610	1500×750×2400	610	900	280	Durcon	одна раковина	440
1-01630	1500×750×2400	610	900	280	Durcon	две раковины	440
1-01620	1500×750×2400	610	900	140	нерж. сталь	одна раковина	440
1-01640	1500×750×2400	610	900	140	нерж. сталь	две раковины	440

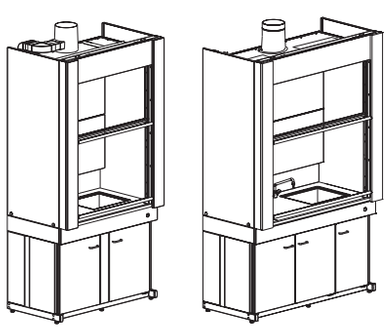

ПЛОТНОМЕРЫ METTLER TOLEDO

Плотномеры серии DE40, DE45, DE51 обеспечивают высочайшую точность при измерении плотности жидкостей.

Плотность образца вычисляется по измеренному значению резонансной частоты и отображается в единицах плотности, удельной массы или в других единицах, например, в единицах шкалы Брикса, градусах API или процентном содержании спирта.

Плотномеры серии DE могут также использоваться для измерения плотности вязких образцов, благодаря автоматической коррекции влияния вязкости.

Встроенный термостат, работающий на эффекте Пельтье, обеспечивает термостатирование образца от +4 до 90°C.

Комбинированный прибор DR45 позволяет одновременно измерять плотность и коэффициент преломления образца.

METTLER TOLEDO




ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ
СТЕКЛОПЛАСТИК

Предназначены для пробоподготовки и выполнения анализов, а также для работы с агрессивными веществами, веществами, вызывающими коррозию, в том числе с концентрированными кислотами.

Рабочая зона, выполненная из монолитного стеклопластика, не имеет металлических деталей.

Рабочая зона — стеклопластик:

- химически устойчива;
- легко моется;
- пожаробезопасна.

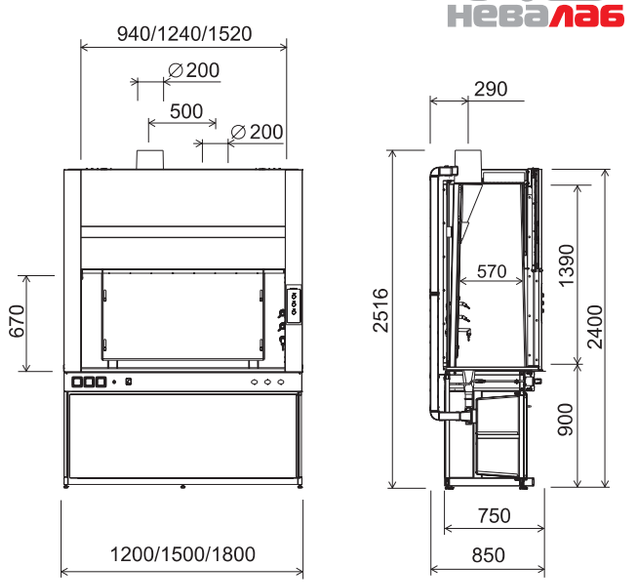


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Розетка 220 В	3 шт.
Выключатель	1 шт.
Автомат УЗО 16 А	1 шт.
Светильник, 2×18 Вт (1200 мм)	1 шт.
Светильник, 2×18 Вт (1500 мм)	2 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


Артикул	Наименование
1-00055	Раковина Durcon с краном дистанционным для воды, жесткой подводкой и фановой трубой
1-00071	Раковина полипропиленовая с краном дистанционным для воды, жесткой подводкой и фановой трубой
1-00095	Кран дистанционный для сжатого воздуха
1-00101	Кран дистанционный для газа

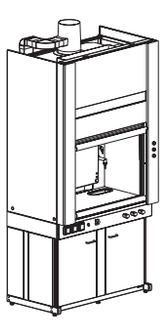

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ШИРИНОЙ 1200 ММ. СТЕКЛОПЛАСТИК

Артикул	Д×Ш×В, мм	Глубина рабочей зоны, мм	Высота столешницы, мм	Рабочая поверхность	Материал раковины	Материал зоны хранения тумбы	Вес, не более, кг
1-01795	1200×750×2400	570	900	керамика	полипропилен	окрашенный металл	400
1-01805	1200×750×2400	570	900	Durcon	Durcon	окрашенный металл	400
1-01815	1200×750×2400	570	900	керамика	полипропилен	полиэтилен	400
1-01825	1200×750×2400	570	900	Durcon	Durcon	полиэтилен	400


Ширина 750 мм указана без учета размера вытяжного короба (см. чертеж).
Расположение тумб: с левой стороны расположен отсек с вытяжкой, с правой — сервисный отсек.

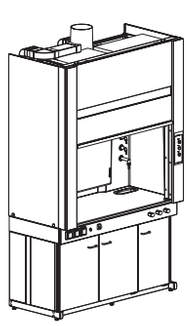

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ШИРИНОЙ 1500 ММ. СТЕКЛОПЛАСТИК

Артикул	Д×Ш×В, мм	Глубина рабочей зоны, мм	Высота столешницы, мм	Рабочая поверхность	Материал раковины	Материал зоны хранения тумбы	Вес, не более, кг
1-01835	1500×750×2400	570	900	керамика	полипропилен	окрашенный металл	440
1-01845	1500×750×2400	570	900	Durcon	Durcon	окрашенный металл	440
1-01855	1500×750×2400	570	900	керамика	полипропилен	полиэтилен	440
1-01865	1500×750×2400	570	900	Durcon	Durcon	полиэтилен	440

Ширина 750 мм указана без учета размера вытяжного короба (см. чертеж).
Расположение тумб: с левой стороны расположены 2 отсека с вытяжкой, с правой — сервисный отсек.

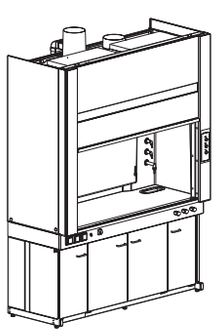

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ШИРИНОЙ 1800 ММ. СТЕКЛОПЛАСТИК

Артикул	Д×Ш×В, мм	Глубина рабочей зоны, мм	Высота столешницы, мм	Рабочая поверхность	Материал раковины	Материал зоны хранения тумбы	Вес, не более, кг
1-01875	1800×750×2400	570	900	керамика	полипропилен	окрашенный металл	470
1-01885	1800×750×2400	570	900	Durcon	Durcon	окрашенный металл	470
1-01895	1800×750×2400	570	900	керамика	полипропилен	полиэтилен	470
1-01905	1800×750×2400	570	900	Durcon	Durcon	полиэтилен	470


Ширина 750 мм указана без учета размера вытяжного короба (см. чертеж).
Расположение тумб: в центре расположены 2 отсека с вытяжкой, с правой и левой — сервисные отсеки.

EUROMAX
ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ С МОЙКОЙ СТЕКЛОПЛАСТИК

Предназначен для мытья лабораторной посуды и аппаратов из стекла, а также для выполнения других работ, требующих наличия вытяжки.

Рабочая зона выполнена из монолитного стеклопластика и не имеет металлических деталей, что позволяет использовать шкаф при работе с агрессивными веществами. Шкаф комплектуется встроенными сервисными тумбами.

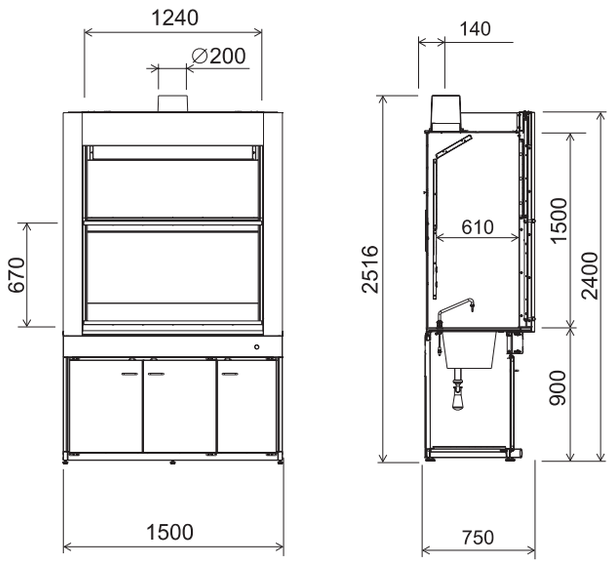


Рабочая зона — стеклопластик:

- химически устойчива;
- легко моется;
- пожаробезопасна.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Смеситель для воды TOF	1 шт.
Раковина, модель L30	1 шт.

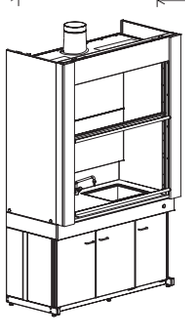

ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ С МОЙКОЙ. СТЕКЛОПЛАСТИК

Артикул	Д×Ш×В, мм	Глубина рабочей зоны, мм	Высота столешницы, мм	Глубина раковины, мм	Рабочая поверхность	Материал раковины	Вес, не более, кг
1-02040	1200×750×2400	610	900	280	Durcon	Durcon	400
1-02045	1500×750×2400	610	900	280	Durcon	Durcon	440
1-02050	1800×750×2400	610	900	280	Durcon	Durcon	470

Подробнее о **РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ** смотрите на страницах 6 – 9.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Рабочая зона представляет собой цельный купол, изготовленный по технологии СТЕКЛОПЛАСТИК-МОНОЛИТ, идеально подходящий для работы с агрессивными веществами и веществами, вызывающими коррозию.

LOVIBOND BOD OXIDIRECT — СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ КИСЛОРОДА (БПК)


Lovibond®

Разработанный в соответствии с международными стандартами ASTM 5210D и EN 1899-2 прибор позволяет точно определять значения БПК в интервале от 1 до 28 дней (БПК5, БПК7 и т. д.).

- Широкий диапазон измерения БПК (от 0 до 4000 мг/л)
- Автоматический расчет значений БПК в мг/л
- Одновременный анализ от 6 до 12 образцов
- Возможность подавления нитрификации
- Память для измеренных и рассчитанных значений
- Не требуется пробоподготовка
- Автоматический старт после нормализации
- Используется с суховоздушными термостатами Lovibond ET (см. стр. 95)



ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ С НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТФОРМАМИ СТЕКЛОПЛАСТИК

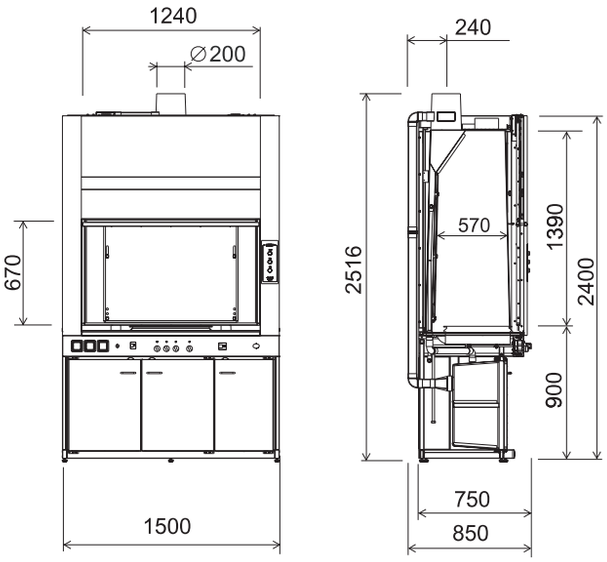

Предназначены для проведения интенсивных работ с агрессивными веществами, в том числе с концентрированными кислотами.

На задней стенке и на столешнице предусмотрены специальные желоба для сбора конденсата. Вдоль задней стенки расположены два вертикальных устройства подачи воды для смыва остатков кислот с внутренней поверхности воздуховода шкафа.

Шкаф оборудован встроенной инфракрасной нагревательной платформой, предназначенной для кипячения агрессивных жидкостей, в том числе кислот.

Нагревательная платформа:


- ИК-нагреватели Philips, мощностью 2 кВт каждый;
- материал рабочей поверхности нагревательной платформы: стеклокерамическая плита Schott;
- температура нагрева: от 50 до 450°С (ПМД 6001 — три ИК-нагревателя);
- размер поверхности нагревательных платформ — 475 × 575 мм.

Рабочая зона — стеклопластик:

- химически устойчива;
- легко моется;
- пожаробезопасна.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Оросительная система	1 шт.
Розетка 220 В	3 шт.
Выключатель	1 шт.
Автомат УЗО 16 А	1 шт.
Светильник, 1×18 Вт (1200 мм)	1 шт.
Светильник, 2×18 Вт (1500 мм)	2 шт.

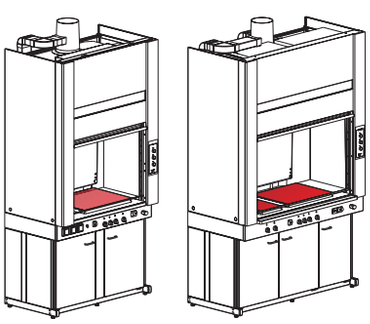

ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ С НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМОЙ 1200 ММ. СТЕКЛОПЛАСТИК

Артикул	Д×Ш×В, мм	Глубина рабочей зоны, мм	Высота столешницы, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-02096	1200×750×2400	570	900	стеклопластик	420

Ширина 750 мм указана без учета размера вытяжного короба (см. чертеж).
Расположение тумб: с левой стороны расположен отсек с вытяжкой, с правой — сервисный отсек.

ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ С НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМОЙ 1500 ММ. СТЕКЛОПЛАСТИК

Артикул	Д×Ш×В, мм	Глубина рабочей зоны, мм	Высота столешницы, мм	Рабочая поверхность	Примечание	Вес, не более, кг
1-02095	1500×750×2400	570	900	стеклопластик	одна нагревательная платформа	450
1-02091	1500×750×2400	570	900	стеклопластик	две нагревательные платформы	470

Ширина 750 мм указана без учета размера вытяжного короба (см. чертеж).
Расположение тумб: с левой стороны расположены 2 отсека с вытяжкой, с правой — сервисный отсек.

Подробнее о **ВСТРОЕННЫХ ТУМБАХ** смотрите на странице 31.

Подробнее о **РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ** смотрите на страницах 6 – 9.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Рабочая зона представляет собой цельный купол, выполненный по технологии Стеклопластик-монолит. Рабочая зона шкафа не содержит металлических деталей и устойчива к парам минеральных кислот. Технология Стеклопластик-монолит соответствует требованиям международного стандарта NFPA 45 («Fire Protection for Laboratories Using Chemicals») и является пожаробезопасной.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОЛОРИМЕТР LOVIBOND® PFXi-195

Автоматическое определение цветности по одномерным шкалам

Колориметр Lovibond® PFXi-195 — это недорогой спектрофотометрический анализатор, позволяющий автоматически определять цветность прозрачных образцов по одномерным шкалам, принятым в качестве промышленных стандартов в области обработки нефтяных и химических продуктов.

Каждая модель колориметра PFXi-195 имеет набор стандартных шкал цветности, специфичных для каждой области промышленности: модель PFXi-195/1 наилучшим образом подходит для работы с химическими веществами, промышленными маслами и жирными кислотами, а модель PFXi-195/2 — для работы с топливами и маслами. Дополнительно отображаются спектральные данные и значения CIE.




EUROMAX
ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Предназначены для хранения различных ядовитых и легковоспламеняющихся веществ.

Корпуса шкафов и зоны для хранения выполнены из стали с пожаростойким порошковым покрытием.

На задней стенке шкафов расположены воздуховоды в кислотостойком исполнении с патрубками из ПВХ диаметром 100 мм.

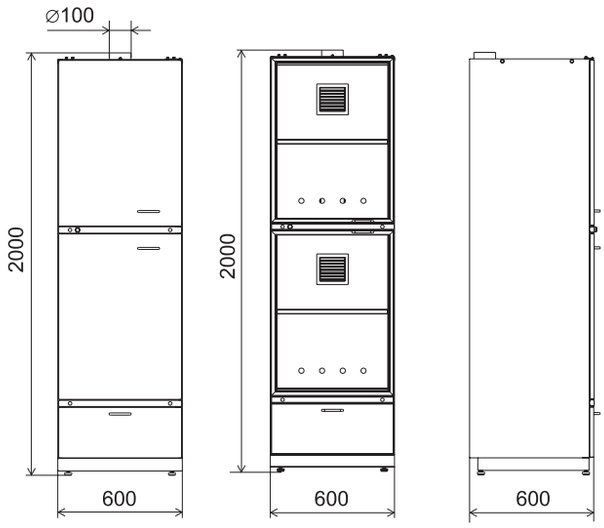

Вентилируемая зона хранения:

- металлические капсулы для хранения ЛВЖ (объем 169 литров);
- полиэтиленовые капсулы для хранения кислот и щелочей (объем 105 литров);
- выдвижной ящик для хранения малогабаритных принадлежностей (объем 36 литров).

Двери:

- съемные двери из стали с шумопоглощением или стеклянные (в зависимости от модели);
- расположение дверей возможно как с правой, так и с левой стороны;
- петли дверей расположены вне зоны хранения, что исключает их коррозию.


Вытяжка:

- воздуховод в кислотостойком исполнении и патрубок диаметром 100 мм из ПВХ;
- возможность установки вентиляционного блока для обеспечения местной принудительной вытяжки.




ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Артикул	Наименование	Д×Ш×В, мм	Материал зоны для хранения	Материал дверей	Вес, не более, кг
1-02120	Шкаф для хранения баллонов	600×600×2030	окрашенная сталь	окрашенная сталь	130
1-02130	Шкаф архивный	1000×735×1800	окрашенная сталь	окрашенная сталь	120
1-02140	Шкаф для хранения реактивов	600×600×2000	окрашенная сталь	окрашенная сталь	120
1-02150	Шкаф для хранения реактивов	600×600×2000	полиэтиленовая вставка	окрашенная сталь	125
1-02160	Шкаф для посуды и приборов	600×600×2000	окрашенная сталь	стекло	110
1-02200	Шкаф для хранения посуды и приборов	600×400×2000	окрашенная сталь	стекло / окрашенная сталь	70
1-02210	Шкаф для хранения со стеклянными дверцами	600×400×2000	окрашенная сталь	стекло	70
1-02220	Шкаф для хранения металлический	600×400×2000	окрашенная сталь	окрашенная сталь	75

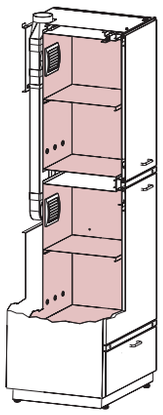

Зона хранения

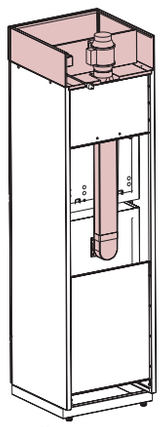

Система вытяжки

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Используемый в шкафах для хранения вентилятор Soler & Palau обеспечивает пониженный уровень шума (18 дБ).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Используемый в шкафах для хранения вентилятор Soler & Palau выполнен в кислотостойком исполнении (ABS).


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Каркас шкафа — прочная металлоконструкция, покрытая белой порошковой эпоксиполиэфирной краской. Материал стеклянных дверей — ударопрочное закаленное стекло.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Вентилятор Soler & Palau (Испания)	1 шт.
Выключатель с индикатором питания	1 шт.
Шнур длиной 2,2 м с вилкой	1 шт.

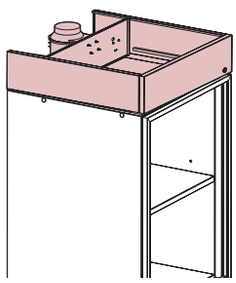

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ БЛОК

Артикул	Д×Ш×В, мм	Производительность, м³/час	Класс защиты	Потребляемая мощность, Вт	Max давление, Па	Вес, не более, кг
1-01590	600×600×240	163	IP44	35	72	20

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ

Предназначен для хранения рабочей одежды и спецодежды.

Шкаф выполнен из стали, покрытой порошковой краской.
Шкаф пожаробезопасен, легко моется и чистится.

Дополнительная секция может монтироваться к боковой стенке шкафа для увеличения объема хранения. Монтируя дополнительные секции, можно создать систему хранения.



Артикул	Наименование	Д×Ш×В, мм	Вес, не более, кг
1-02170	Шкаф для хранения одежды	500×360×1820	50
1-02171	Дополнительная секция к шкафу для хранения одежды	500×360×1820	45

СКРУББЕР


Вывод очищенного воздуха в вентиляцию

Эффективный, и легко монтируемый скруббер (жидкостный абсорбер) специально сконструирован для использования с вытяжными шкафами в лаборатории. При его подключении к системе вытяжных шкафов (до 3 штук) исключается проникновение в вентиляцию паров кислот и других водорастворимых веществ. Долговечный материал и малая занимаемая площадь делают его удобным в эксплуатации. Жидкостный абсорбер не имеет движущихся частей и поэтому практически не нуждается в обслуживании.



Артикул	Д×Ш×В, мм	ΔP, мм. вод. ст.	Присоед. D, мм	V очищаемого воздуха, м³/ч	Уводы на 8 ч, л
5-73400	950×950×2400	52	315	2400	240

Схема подключения к вытяжному шкафу

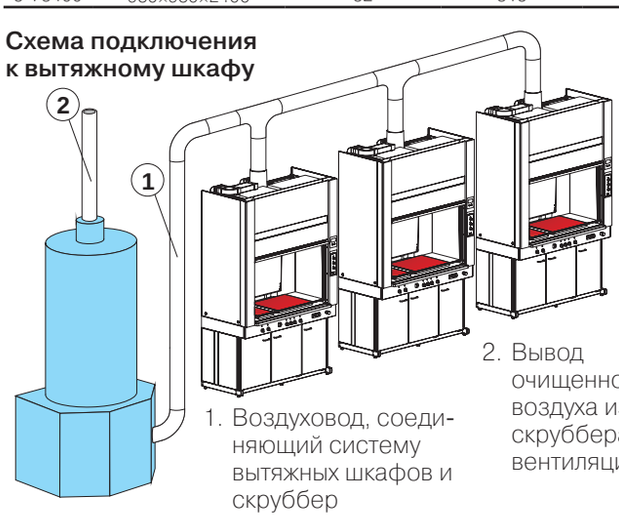

1. Воздуховод, соединяющий систему вытяжных шкафов и скруббер
2. Вывод очищенного воздуха из скруббера в вентиляцию

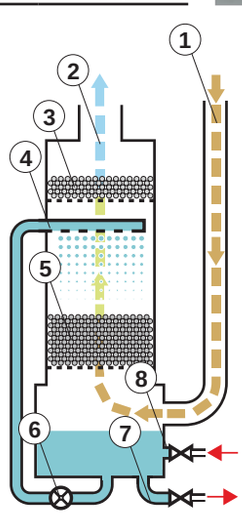


Схема действия скруббера

1. Ввод воздушной смеси из вытяжного шкафа
2. Выход очищенного воздуха в вентиляцию
3. Отбойник
4. Водяная форсунка
5. Полипропиленовая насадка
6. Насос кислотостойкий
7. Вывод отработанной жидкости
8. Подача водопроводной воды



EUROMINI

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

Лабораторная мебель серии EUROMINI сочетает в себе функциональность, комфорт и экономичность получаемых решений.

Лаборатория, оснащенная мебелью серии EUROMINI, может быть дополнительно укомплектована мебелью серии EUROMAX и наоборот.



- Конструктивные особенности мебели серии EUROMINI позволяют создавать как универсальные, так и специализированные рабочие места в лабораторных помещениях любой площади и с любой высотой потолка.
  - Как и в мебели серии EUROMAX, основой лабораторной мебели серии EUROMINI служит металлический консольный каркас C-FRAME, выдерживающий нагрузки до 120 кг.
- В зависимости от условий работы и решаемых задач в качестве материала для рабочих поверхностей (столешниц) мебели серии EUROMINI может быть выбран либо эпоксидный композит Durcon, либо слоистый пластик LabGrade, либо химически стойкая керамическая плитка, либо ламинированная плита.

EUROMINI
ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ


СТОЛЫ ПРИСТЕННЫЕ

Предназначены для создания рабочих мест, располагающихся в непосредственной близости от стен лаборатории. Являются наиболее часто используемыми и наиболее многофункциональными элементами организации рабочего пространства лабораторий.

- Основой столов является металлический каркас C-Frame, позволяющий столам выдерживать нагрузку до 120 кг.
- Съемные нижние панели под столешницей обеспечивают доступ к водным, газовым и электрическим коммуникациям, которые могут быть проведены внутри столов.
- В зависимости от решаемой задачи пристенные столы могут комплектоваться дополнительным оборудованием.






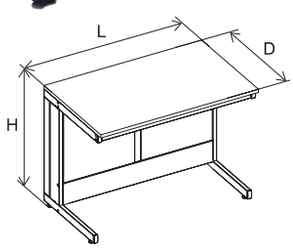


СТОЛЫ ПРИСТЕННЫЕ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-02520	1200	600	900	ламинат	45
1-02530	1200	600	900	нерж. сталь	45
1-02540	1200	600	900	LabGrade	45
1-02500	1200	600	900	керамика	45
1-02510	1200	600	900	Durcon	55
1-02545	1200	600	900	Durcon с бортиком	55
1-02515	1200	600	900	Quarella	50

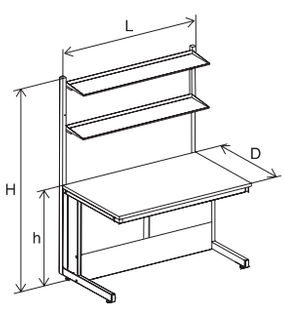

СТОЛЫ ПРИСТЕННЫЕ С ОТКРЫТЫМИ ПОЛКАМИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Высота столешницы, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-02550	1200	630	1695	900	ламинат	55
1-02560	1200	630	1695	900	нерж. сталь	55
1-02570	1200	630	1695	900	LabGrade	55
1-02580	1200	630	1695	900	керамика	55
1-02590	1200	630	1695	900	Durcon	65
1-02595	1200	630	1695	900	Durcon с бортиком	65
1-02585	1200	630	1695	900	Quarella	60

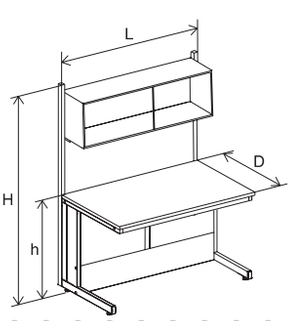

СТОЛЫ ПРИСТЕННЫЕ С ЗАКРЫТОЙ ПОЛКОЙ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Высота столешницы, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-02600	1200	630	1695	900	ламинат	60
1-02610	1200	630	1695	900	нерж. сталь	60
1-02620	1200	630	1695	900	LabGrade	60
1-02630	1200	630	1695	900	керамика	60
1-02640	1200	630	1695	900	Durcon	70
1-02635	1200	630	1695	900	Quarella	70

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Конструкция каркаса C-FRAME обеспечивает удобство и комфорт при работе за столом, а так же легкий доступ к пространству под столом при уборке помещения.


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Задний экран на столе (под нижней полкой) может сниматься для обеспечения доступа к электророзеткам, расположенным на стенах лаборатории. Верхняя декоративная панель (между экраном и полкой) снимается при установке короба с розетками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТУМБЫ ПОДВЕСНЫЕ

Артикул	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, не более, кг
1-02810	Тумба с полкой (левая дверца)	520	525	645	35
1-02830	Тумба с полкой (правая дверца)	520	525	645	35
1-02850	Тумба с 3 выдвижными ящиками	520	525	645	35
1-02860	Тумба с 5 выдвижными ящиками	520	525	645	35

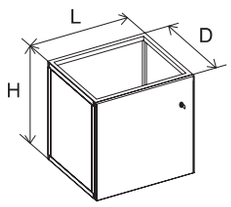



ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Артикул	Наименование
1-02440	Короб ПВХ с розетками: 2 розетки, 1 автомат, 1200×70×120
1-02450	Короб ПВХ с розетками: 4 розетки, 1 автомат, 1200×70×120
1-02470	Кран для газа с гибкой подводкой
1-02471	Кран для воздуха с гибкой подводкой
1-02472	Кран для вакуума с гибкой подводкой
1-02460	Кран для воды (раковина из полипропилена, гибкая подводка, сифон, адаптер)
1-02490	Полка закрытая стальная со стеклянными дверцами, 1130×300×400
1-02480	Лампа на прищепке

Подробнее о
ПОДВЕСНЫХ ТУМБАХ
смотрите на странице 15.

Подробнее о
РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ
смотрите на страницах 6 – 9.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Полка со стеклянными дверцами высотой 300 мм, предназначенная для хранения документов, лабораторной посуды и неагрессивных химических реактивов, может также крепиться на стену. Материал — ударопрочное закаленное стекло.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Короб с розетками позволяет подключать электрическое оборудование суммарной мощностью до 2,2 кВт.





HORIBA OCMA-350

Простой, надежный и точный анализатор содержания нефтепродуктов в воде и почве. Для экстракции нефтепродуктов поставляется специальный безопасный высокоэффективный экстрагент HORIBA S-316.

Экстрагент S-316 можно регенерировать с помощью специальной установки, поставляемой вместе с анализатором.





EUROMINI
ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

СТОЛЫ ПРИБОРНЫЕ

Столы приборные предназначены для размещения аналитических приборов и лабораторного оборудования.

- Усиленные приборные столы предназначены для размещения приборов массой до 300 кг.
- Короб с розетками позволяет подключать электрическое оборудование суммарной мощностью до 2,2 кВт.






КОМПЛЕКТАЦИЯ:

(для столов приборных с блоком розеток)


Короб ПВХ с 4 розетками 220 В	1 шт.
Автомат УЗО 16 А	1 шт.
Кабель 3×1 2,2 м	1 шт.

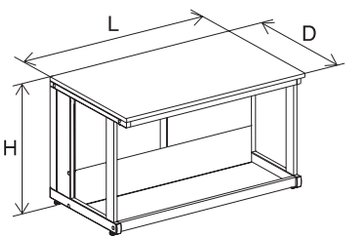

СТОЛЫ ПРИБОРНЫЕ УСИЛЕННЫЕ*

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-02390	1200	600	900	ламинат	70
1-02395	1200	600	900	ламинат	75**
1-02400	1200	600	900	нерж. сталь	70
1-02410	1200	600	900	LabGrade	70
1-02415	1200	600	900	LabGrade	75**
1-02420	1200	600	900	керамика	70
1-02425	1200	600	900	керамика	75**
1-02430	1200	600	900	Durcon	80
1-02435	1200	600	900	Durcon	85**
1-02421	1200	600	900	Quarella	80
1-02426	1200	600	900	Quarella	85**


* Конструкция приборных усиленных столов не позволяет подвешивать тумбы
** с нижней полкой

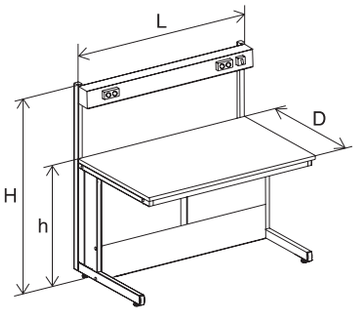

СТОЛЫ ПРИБОРНЫЕ С БЛОКОМ РОЗЕТОК

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Высота столешницы, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-02340	1200	600	1265	900	керамика	55
1-02350	1200	600	1265	900	Durcon	65
1-02345	1200	600	1265	900	Quarella	55
1-02360	1200	600	1265	900	ламинат	55
1-02370	1200	600	1265	900	нерж. сталь	55
1-02380	1200	600	1265	900	LabGrade	55

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

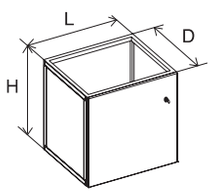

ТУМБЫ ПОДВЕСНЫЕ (для столов приборных с блоком розеток)

Артикул	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, не более, кг
1-02810	Тумба с полкой (левая дверца)	520	525	645	35
1-02830	Тумба с полкой (правая дверца)	520	525	645	35
1-02850	Тумба с 3 выдвижными ящиками	520	525	645	35
1-02860	Тумба с 5 выдвижными ящиками	520	525	645	35

Подробнее о **ПОДВЕСНЫХ ТУМБАХ** смотрите на странице 15.

Подробнее о **РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ** смотрите на страницах 6 – 9.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Буквами D, L и H на чертежах обозначены: D — ширина, L — длина, H— высота.

СТОЛЫ ОСТРОВНЫЕ

Формирование островных столов осуществляется по модульному принципу.

Для создания островных комплектов используются любые модели пристенных столов и столов с мойками.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Островные модульные комплекты EUROMINI проще собрать, чем островные комплекты EUROMAX (см. стр. 20), однако, они не формируют сплошную рабочую поверхность.

EUROMINI
ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ


СТОЛЫ-МОЙКИ


Предназначены для мытья лабораторной посуды и составных частей лабораторных установок и аппаратов.


- Все столы-мойки укомплектованы тумбами.
- Столы-мойки могут быть использованы для создания островных комплектов столов (см. стр. 49).






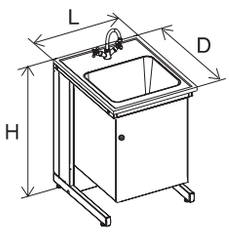

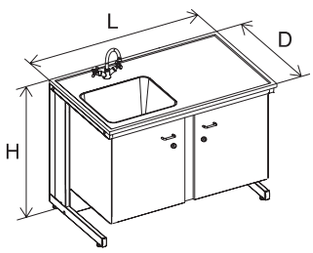

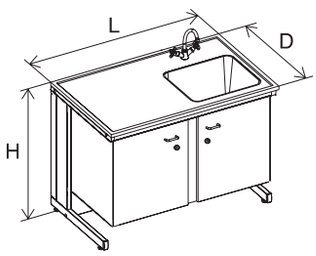

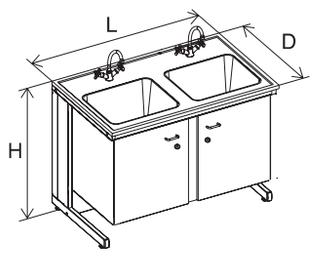

СТОЛЫ-МОЙКИ ОДИНАРНЫЕ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина раковины, мм	Материал раковины	Вес, не более, кг
1-02770	500	600	900	140	нерж. сталь	45
1-02780	500	600	900	300	стеклопластик	45
1-02790	500	600	900	200	Durcon	55

СТОЛЫ-МОЙКИ ОДИНАРНЫЕ (мойка расположена слева)

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина раковины, мм	Материал раковины	Вес, не более, кг
1-02710	1200	600	900	140	нерж. сталь	70
1-02720	1200	600	900	300	стеклопластик	70
1-02730	1200	600	900	200	Durcon	90


СТОЛЫ-МОЙКИ ОДИНАРНЫЕ (МОЙКА РАСПОЛОЖЕНА СПРАВА)

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина раковины, мм	Материал раковины	Вес, не более, кг
1-02740	1200	600	900	140	нерж. сталь	70
1-02750	1200	600	900	300	стеклопластик	70
1-02760	1200	600	900	200	Durcon	90

СТОЛЫ-МОЙКИ ДВОЙНЫЕ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Материал раковины	Глубина раковины, мм	Примечание	Вес, не более, кг
1-02650	1200	600	900	нерж. сталь	140	два смесителя	70
1-02660	1200	600	900	стеклопластик	300	два смесителя	70
1-02670	1200	600	900	Durcon	200	два смесителя	100
1-02680	1200	600	900	нерж. сталь	140	один смеситель	70
1-02690	1200	600	900	стеклопластик	300	один смеситель	70
1-02700	1200	600	900	Durcon	200	один смеситель	100

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

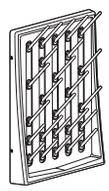

СУШИЛКА НАСТЕННАЯ ДЛЯ ПОСУДЫ


Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, не более, кг
1-02800	400	150	500	10

СТОЛЫ-ПРИСТАВКИ

Столы-приставки используются для создания дополнительного рабочего пространства в лабораториях.

Столы-приставки можно использовать как самостоятельные элементы рабочего пространства лаборатории, так и в комплекте с пристенными и островными столами.



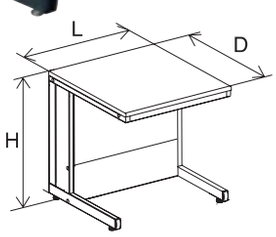


СТОЛЫ-ПРИСТАВКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-02290	600	600	900	ламинат	40
1-02300	600	600	900	LabGrade	40
1-02305	600	600	900	Durcon	40
1-02295	600	600	900	Quarella	40

СТОЛЫ-ПРИСТАВКИ С ПОЛКАМИ


Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Высота столешницы, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-02310	600	600	1265	900	ламинат	45
1-02320	600	600	1265	900	LabGrade	45
1-02315	600	600	1265	900	Quarella	45

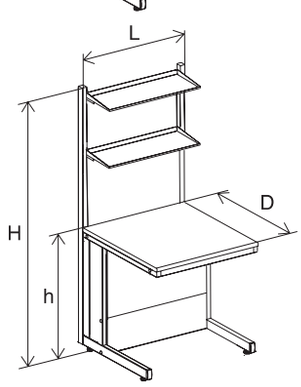

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТУМБЫ ПОДВЕСНЫЕ

Артикул	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, не более, кг
1-02810	Тумба с полкой (левая дверца)	520	525	645	35
1-02830	Тумба с полкой (правая дверца)	520	525	645	35
1-02850	Тумба с 3 выдвижными ящиками	520	525	645	35
1-02860	Тумба с 5 выдвижными ящиками	520	525	645	35

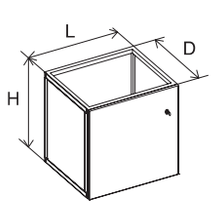

Подробнее о **ПОДВЕСНЫХ ТУМБАХ** смотрите на странице 15.

Подробнее о **РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ** смотрите на страницах 6 – 9.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Сушилка для посуды, размещенная над столом-мойкой, позволяет легко и быстро просушить вымытую лабораторную посуду.


EUROMINI
ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ


СТОЛЫ ВЕСОВЫЕ

Предназначены для размещения весоизмерительной техники.

Конструктивные особенности весовых столов позволяют эффективно гасить вибрацию в процессе взвешивания, что обеспечивает отличную воспроизводимость результатов.



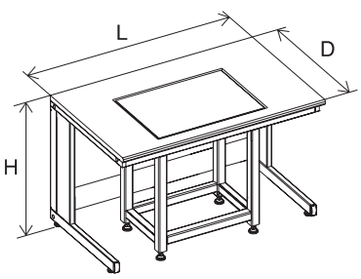

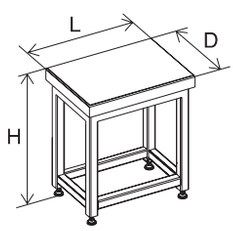

СТОЛЫ ВЕСОВЫЕ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-02230	1200	600	750	гранит, ламинат	150
1-02240	1200	600	750	гранит, LabGrade	150

СТОЛ ВЕСОВОЙ МАЛЫЙ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-02250	630	450	750	гранит	100

Подробнее о **РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ** смотрите на страницах 6 – 9.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Амплитуда вибрации на поверхности весовых столов EUROMINI не превышает величин, регламентированных требованиями ГОСТ 12.1.012.90. Собственные частоты рам и плит столов лежат в диапазоне более 180 Гц.

КОЛОРИМЕТР LOVIBOND® PFXi-995/P ДЛЯ АНАЛИЗА НЕФТЕПРОДУКТОВ

Lovibond®

Наиболее полный набор шкал цветности


Колориметр PFXi-995/P обеспечивает получение объективных однозначных данных в диапазоне основных принятых в промышленности шкал цветности, а также спектральных данных и значений CIE. Идеально подходит для компаний, работающих с различными типами продуктов и разными спецификациями цвета. Рекомендуется для использования в центральных и независимых испытательных лабораториях. Прибор легко настраивается для выборочной индикации шкал, если это необходимо пользователю.



СТОЛЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ


Предназначены для организации дополнительных рабочих мест.



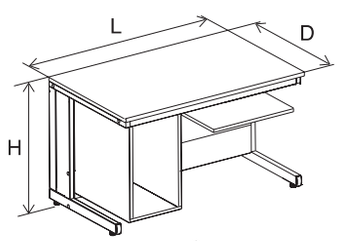


СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ С ВЫДВИЖНОЙ ПОЛКОЙ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-02260	1200	600	750	ламинат	45

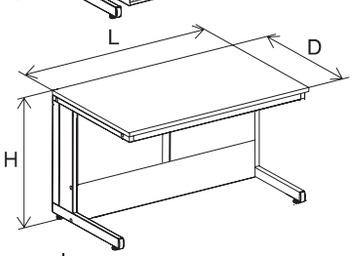

СТОЛЫ ПИСЬМЕННЫЕ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая поверхность	Примечание	Вес, не более, кг
1-02270	1200	600	750	ламинат		40
1-02280	1200	600	750	ламинат	с тумбой	60

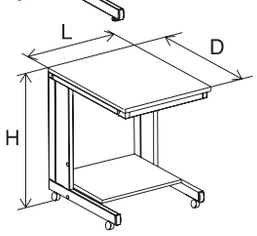

ТЕЛЕЖКА

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-02310	600	600	900	ламинат	45
1-03570	600	560	650	сталь	40



APURA® — РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ТИТРОВАНИЯ ПО МЕТОДУ КАРЛА ФИШЕРА

apura On the Trail of Water

Серия реагентов под торговой маркой APURA® фирмы Merck предназначена для определения содержания воды с помощью титрования по методу Карла Фишера. Серия реагентов APURA® включает в себя однокомпонентные и двухкомпонентные реагенты для волюмометрического титрования, реактивы для кулонометрии и специальные реактивы для определения воды в кетонах и других «проблемных» веществах. Серию дополняют стандартные образцы для определения титра реагентов и растворители.


EUROMINI
ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

УСТАНОВКИ ТИТРОВАЛЬНЫЕ

Позволяют облегчить и упростить выполнение титриметрических анализов при ручном титровании растворов.

- Установки оснащены матовым экраном с подсветкой и пятью штативами для бюреток.
- В стандартную комплектацию входят 10 полипропиленовых зажимов для бюреток, четыре люминесцентные лампы PHILIPS, короб с двойной розеткой, автоматом отключения питания и выключателем.




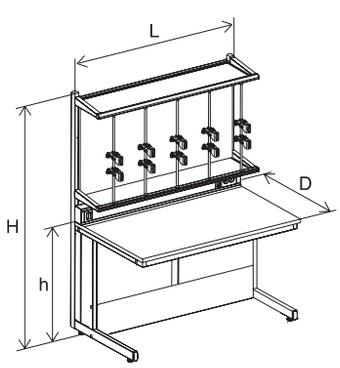

УСТАНОВКИ ТИТРОВАЛЬНЫЕ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Высота экрана, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-02335	1200	640	1695	795	ламинат	120
1-02336	1200	640	1695	795	керамика	120
1-02337	1200	640	1695	795	LabGrade	120
1-02338	1200	640	1695	795	Durcon	130
1-02334	1200	640	1695	795	Quarella	130

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

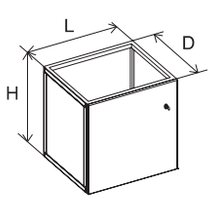

ТУМБЫ ПОДВЕСНЫЕ

Артикул	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, не более, кг
1-02810	Тумба с полкой (левая дверца)	520	525	645	35
1-02830	Тумба с полкой (правая дверца)	520	525	645	35
1-02850	Тумба с 3 выдвижными ящиками	520	525	645	35
1-02860	Тумба с 5 выдвижными ящиками	520	525	645	35

Подробнее о **ПОДВЕСНЫХ ТУМБАХ** смотрите на странице 15.

Подробнее о **РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ** смотрите на страницах 6 – 9.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Для уменьшения шума дверцы подвесных тумб заполнены специальным звукопоглощающим материалом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Каркас стола представляет собой прочную металлоконструкцию C-FRAME, покрытую порошковой эпоксиполиэфирной краской.

TITRATION EXCELLENCE — НОВАЯ ЛИНЕЙКА ТИТРАТОРОВ METTLER TOLEDO

Новая линейка титраторов Titration Excellence с функцией One Click Titration™ — это новый этап на пути развития простых, эффективных и безопасных решений для титрования. Линейка Titration Excellence разработана на базе новой платформы, включает три основные модели титраторов T50, T70, T90.

Интуитивно понятный и развитый интерфейс пользователя с использованием технологии Touch Screen делает управление титраторами весьма простым. Тщательно продуманная структура меню и навигация, сообщения о текущих анализах и уникальная функция Home Screen (аналог представления «Рабочий стол» в Windows) гарантируют простоту использования и безопасность.

Функция One Click Titration™ дает максимальную эффективность при проведении рутинных анализов. На Home Screen (Рабочем столе) можно поместить индивидуальный набор функций для их запуска лишь одним нажатием клавиши (например, промывка бюретки, методы, серия образцов). Гибкое управление профилями пользователей позволяет сделать индивидуальные настройки для 30 пользователей, включая персональный Home Screen. Благодаря функции Plug and Play бюретки, приводы бюреток, автоматические податчики и весы распознаются автоматически и конфигурируются немедленно после подключения, причем для этого не нужно выключать титратор.





Титратор T50 — готовая к использованию система, включающая все необходимое для начала титрования. Доступна в двух комплектах, включающих управляющий модуль, терминал и ручной стенд для титрования (T50 M Terminal) или автоматический стенд для титрования (Rondolino T50 A Terminal). Титратор T50 предназначен для пользователей, нуждающихся в простой, надежной и при этом развитой системе для анализов, в которых важна быстрота управления и скорость анализа (замена титраторов DL50 Graphix и DL50 Rondolino).

Титратор T70 — универсальный многозадачный титратор с возможностью гибкого редактирования методов и модернизации (дополнительная плата для потенциометрических, поляризационных или кондуктометрических датчиков, либо модернизация до T90), а также с возможностью создания циклов методов для объединения разных методов в один. Это титратор для пользователей, которым необходима гибкая и расширяемая система, легко адаптируемая под текущие или будущие потребности (замена титраторов DL53, DL55).

Титратор T90 — система для титрометрического анализа, предлагающая неограниченные гибкие возможности, включая параллельное титрование, логические функции (выполнение условий if ... then ...) и уникальную функцию Sample Series Sequences для объединения серий образцов, анализируемых по разным методам, в одну серию. Титратор T90 обеспечивает непревзойденную эффективность пользователям, нуждающимся в самой большой гибкости методов для сложных анализов и автоматизации (замена титраторов DL58, DL70, DL77).



ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ EUROMINI

Вытяжные шкафы позволяют решать разнообразные задачи, связанные с использованием в лаборатории опасных и токсичных веществ. Выбор нужной модели шкафа зависит от характера выполняемых работ и типа используемых химических веществ.

Шкафы серии EUROMINI оснащены вентилируемыми металлическими тумбами для хранения сыпучих химических реактивов и неагрессивных жидкостей.

Для хранения кислот используются металлические тумбы со специальными полиэтиленовыми вставками, которые защищают внутреннюю поверхность тумб от коррозии.

Вытяжные шкафы серии EUROMINI разработаны с учетом европейских требований стандартов DIN и BS.

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ
ОКРАШЕННАЯ СТАЛЬ

Предназначены для обеспечения безопасных для здоровья персонала условий при проведении пробоподготовки, выполнении анализов, а также при работе с приборами и установками для органического синтеза.

Вытяжные шкафы с большим стеклянным проемом и рабочей зоной, выполненной из стали, покрытой порошковой краской.

Рабочая зона — окрашенная сталь:


- легко моется;
- пожаробезопасна.


КОМПЛЕКТАЦИЯ:


Розетка 220 В	3 шт.
Выключатель	1 шт.
Автомат УЗО 16 А	1 шт.
Светильник, 2×18 Вт (1200 мм)	1 шт.
Светильник, 2×18 Вт (1500 мм)	2 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Артикул	Наименование
1-02455	Раковина Durcon с краном для воды
1-02465	Раковина полипропиленовая с краном для воды
1-02475	Кран для газа
1-02485	Кран для воздуха

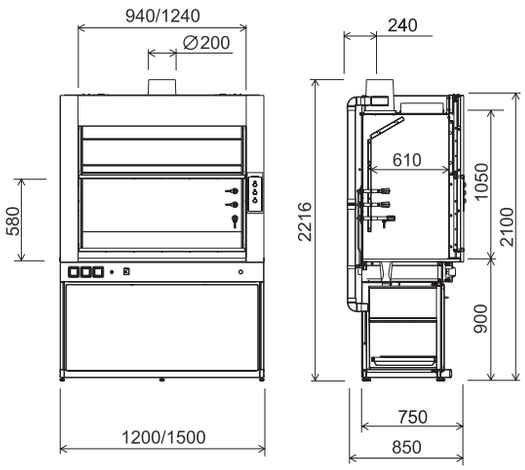

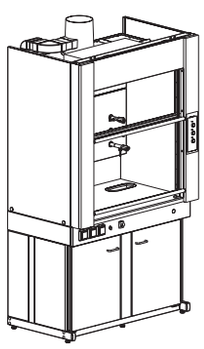

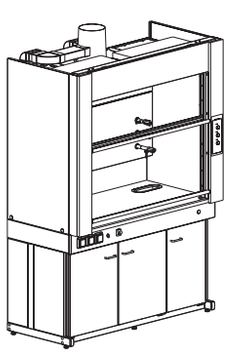

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ШИРИНОЙ 1200 ММ. ОКРАШЕННАЯ СТАЛЬ

Артикул	Д×Ш×В, мм	Глубина рабочей зоны, мм	Высота столешницы, мм	Рабочая поверхность	Материал зоны хранения тумбы	Вес, не более, кг
1-03005	1200×750×2100	610	900	керамика	металл	370
1-03010	1200×750×2100	610	900	нерж. сталь	металл	370
1-03015	1200×750×2100	610	900	Durcon	металл	370
1-03025	1200×750×2100	610	900	керамика	полиэтилен	370
1-03030	1200×750×2100	610	900	нерж. сталь	полиэтилен	370
1-03035	1200×750×2100	610	900	Durcon	полиэтилен	370

Ширина 750 мм указана без учета размера вытяжного короба (см. чертеж).
Расположение тумб: с левой стороны расположен отсек с вытяжкой, с правой — сервисный отсек.

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ШИРИНОЙ 1500 ММ. ОКРАШЕННАЯ СТАЛЬ

Артикул	Д×Ш×В, мм	Глубина рабочей зоны, мм	Высота столешницы, мм	Рабочая поверхность	Материал зоны хранения тумбы	Вес, не более, кг
1-03045	1500×750×2100	610	900	керамика	металл	420
1-03050	1500×750×2100	610	900	нерж. сталь	металл	420
1-03055	1500×750×2100	610	900	Durcon	металл	420
1-03065	1500×750×2100	610	900	керамика	полиэтилен	420
1-03070	1500×750×2100	610	900	нерж. сталь	полиэтилен	420
1-03075	1500×750×2100	610	900	Durcon	полиэтилен	420

Ширина 750 мм указана без учета размера вытяжного короба (см. чертеж).
Расположение тумб: с левой стороны расположены 2 отсека с вытяжкой, с правой — сервисный отсек.

Подробнее о **ВСТРОЕННЫХ ТУМБАХ** смотрите на странице 31.

Подробнее о **РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ** смотрите на страницах 6 – 9.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Вытяжные шкафы серии EUROMINI комплектуются встроенными тумбами. Тумба с вытяжкой поставляется в кислотостойком исполнении. Внутренняя камера тумбы облицована листами из ПВХ, защищающими металл от коррозии.



СУХОВОЗДУШНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ LOVIBOND СЕРИИ ET

Lovibond®

Бесфреонные термостаты Lovibond® обеспечивают термостатирование образцов в диапазоне от +2 до 40°С с шагом 1°С. Термостаты оснащены цифровым дисплеем и прозрачной дверью.

Основные области применения:

- определение БПК при +20°С;
- хранение образцов воды перед проведением анализов при +4°С;
- тестирование ферментной активности при +25°С;
- подсчет колоний при +37°С.

EUROMINI
ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ


ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ
ПЛАСТИК ПВХ

Предназначены для пробоподготовки и выполнения анализов, а также для работы с агрессивными веществами, веществами, вызывающими коррозию, в том числе с концентрированными кислотами.

Рабочая зона — пластик ПВХ:

- химически устойчив;
- легко моется;
- пожаробезопасна.

Не рекомендуется устанавливать в шкаф нагревательные приборы, так как это может вызвать деформацию стенок из ПВХ

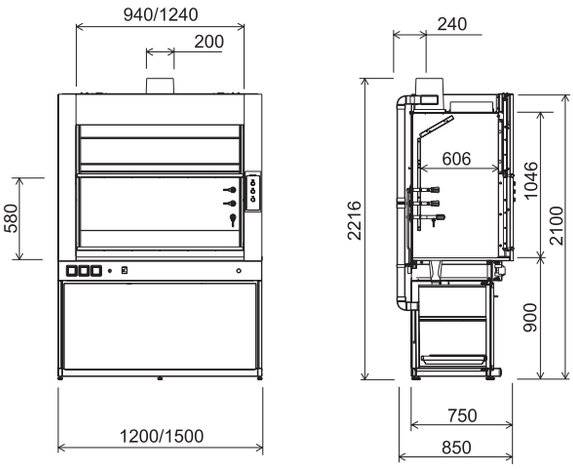



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Артикул	Наименование
1-02455	Раковина Durcon с краном для воды
1-02465	Раковина полипропиленовая с краном для воды
1-02475	Кран для газа
1-02485	Кран для воздуха

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Розетка 220 В	3 шт.
Выключатель	1 шт.
Автомат УЗО 16 А	1 шт.
Светильник, 2×18 Вт (1200 мм)	1 шт.
Светильник, 2×18 Вт (1500 мм)	2 шт.

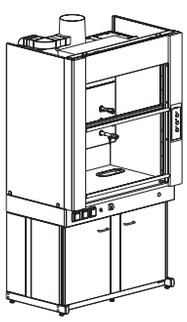

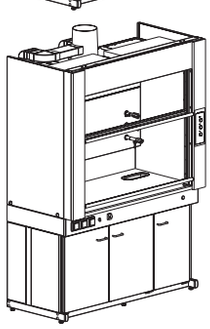

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ШИРИНОЙ 1200 ММ. ПЛАСТИК ПВХ

Артикул	Д×Ш×В, мм	Глубина рабочей зоны, мм	Высота столешницы, мм	Рабочая поверхность	Материал зоны хранения тумбы	Вес, не более, кг
1-03085	1200×750×2100	606	900	керамика	металл	370
1-03095	1200×750×2100	606	900	Durcon	металл	370
1-03115	1200×750×2100	606	900	керамика	полиэтилен	370
1-03125	1200×750×2100	606	900	Durcon	полиэтилен	370

Ширина 750 мм указана без учета размера вытяжного короба (см. чертеж).
Расположение тумб: с левой стороны расположен отсек с вытяжкой,
с правой — сервисный отсек.

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ШИРИНОЙ 1500 ММ. ПЛАСТИК ПВХ

Артикул	Д×Ш×В, мм	Глубина рабочей зоны, мм	Высота столешницы, мм	Рабочая поверхность	Материал зоны хранения тумбы	Вес, не более, кг
1-03145	1500×750×2100	606	900	керамика	металл	420
1-03155	1500×750×2100	606	900	Durcon	металл	420
1-03185	1500×750×2100	606	900	керамика	полиэтилен	420
1-03195	1500×750×2100	606	900	Durcon	полиэтилен	420

Ширина 750 мм указана без учета размера вытяжного короба (см. чертеж).
Расположение тумб: с левой стороны расположены 2 отсека с вытяжкой,
с правой — сервисный отсек.

STUART SCIENTIFIC CP300
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПЛИТКА
С ПОВЫШЕННОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ

Основное применение: пробоподготовка для анализа следовых концентраций металлов и кислотное разложение.

Конструктивные элементы из фторопласта и керамики обеспечивают надежную защиту от агрессивных химических веществ.


Плитка и пульт регулировки температуры выполнены в виде отдельных блоков и соединены с помощью покрытого фторопластом кабеля.



ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ С МОЙКАМИ
ОКРАШЕННАЯ СТАЛЬ

Предназначены для мытья лабораторной посуды и аппаратов из стекла, а также для выполнения других работ, требующих наличия вытяжки.

Шкафы комплектуются встроенными тумбами.

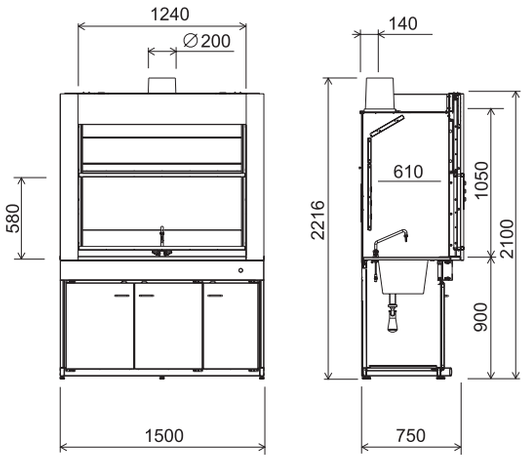


Рабочая зона — окрашенная сталь:

- легко моется;
- пожаробезопасна.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Смеситель для воды TOF	1 шт.
Раковина, модель L30	1 шт.

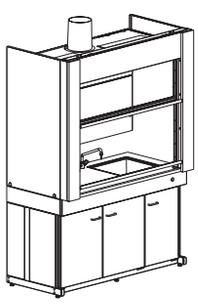

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ С МОЙКАМИ 1500 ММ. ОКРАШЕННАЯ СТАЛЬ

Артикул	Д×Ш×В, мм	Глубина рабочей зоны, мм	Высота столешницы, мм	Рабочая поверхность	Глубина раковины, мм	Материал раковины	Вес, не более, кг
1-03110	1500×750×2100	610	900	Durcon	280	Durcon	420
1-03120	1500×750×2100	610	900	LabGrade	140	нерж. сталь	420
1-03140	1500×750×2100	610	900	Durcon	280	Durcon	420
1-03150	1500×750×2100	610	900	LabGrade	140	нерж. сталь	420

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ


Используются в химико-аналитических лабораториях для работ с большинством химических веществ, кроме плавиковой кислоты. Прозрачные стенки обеспечивают возможность визуального контроля проводимых анализов.

- Металлический каркас.
- Две боковые стенки и задняя стенка выполнена из прозрачного стекла.
- Воздуховод выполнен из кислотостойкого ПВХ.
- Все стенки съемные, что позволяет соединять шкафы по модульному принципу, создавая единое пространство в рабочей зоне шкафов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Светильник	1 шт.
Розетка 220 В	2 шт.
Выключатель	1 шт.
Автомат УЗО 16 А	1 шт.



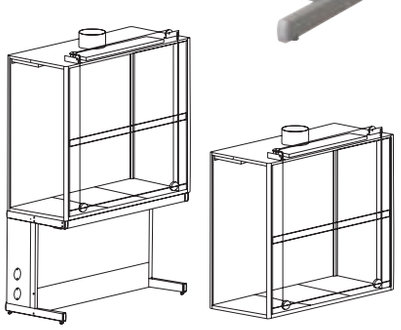

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ

Артикул	Д×Ш×В, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-04290	1050×650×1400	керамика	150
1-04295	1050×650×1400	LabGrade	150

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ

Артикул	Д×Ш×В, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-04270	1050×650×2200	керамика	200
1-04275	1050×650×2200	LabGrade	200

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ С ПОДВОДОМ ВОДЫ


Артикул	Д×Ш×В, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-04280	1050×650×2200	LabGrade	200
1-04285	1050×650×2200	керамика	200

EUROMINI
ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НИЗКИМ ПОТОЛКОМ

Предназначен для помещений с высотой потолка 2 м.

Конструкция шкафа позволяет установить одну подвесную тумбу с вытяжкой.

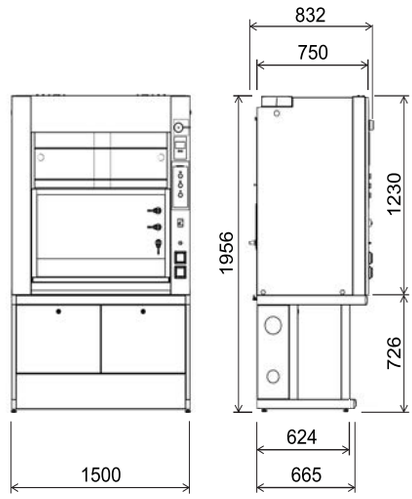

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Розетка 220 В	2 шт.
Выключатель	1 шт.
Автомат УЗО 16 А	1 шт.
Светильник, 2×18 Вт	2 шт.
Монитор воздушного потока МВП 001	1 шт.

Рабочая зона — окрашенная сталь:

- идеально подходит для работы сидя, высота рабочей поверхности 750 мм
- организация вытяжки в боковые стороны
- верхний экран с раздвижными стёклам
- легко моется;
- пожаробезопасна.



ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ШИРИНОЙ 1200 ММ

Артикул	Д×Ш×В, мм	Глубина рабочей зоны, мм	Высота столешницы, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-20110	1200×750×1950	610	750	нерж. сталь	250
1-20120	1200×750×1950	610	750	керамика	250
1-20130	1200×750×1950	610	750	Durcon	250
1-20140	1200×750×1950	610	750	Quarella	250

Ширина 750 мм указана без учета размера вытяжного короба (см. чертеж).

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ШИРИНОЙ 1500 ММ

Артикул	Д×Ш×В, мм	Глубина рабочей зоны, мм	Высота столешницы, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-20150	1500×750×1950	610	750	нерж. сталь	280
1-20160	1500×750×1950	610	750	керамика	280
1-20170	1500×750×1950	610	750	Durcon	280
1-20180	1500×750×1950	610	750	Quarella	280

Ширина 750 мм указана без учета размера вытяжного короба (см. чертеж).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Артикул	Наименование
1-02455	Раковина Durcon с краном для воды
1-02465	Раковина полипропиленовая с краном для воды
1-02475	Кран для газа
1-02485	Кран для сжатого воздуха


ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ С ДВОЙНОЙ МОЙКОЙ

Артикул	Д×Ш×В, мм	Глубина рабочей зоны, мм	Высота столешницы, мм	Глубина раковины, мм	Рабочая поверхность	Материал раковины	Вес, не более, кг
1-20320	1500×750×1950	610	750	200	Durcon с бортиком	Durcon	330

Ширина 750 мм указана без учета размера вытяжного короба (см. чертеж).

ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ С МОЙКОЙ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Предназначен для отвода вредных газов и испарений при работе с нефтепродуктами.

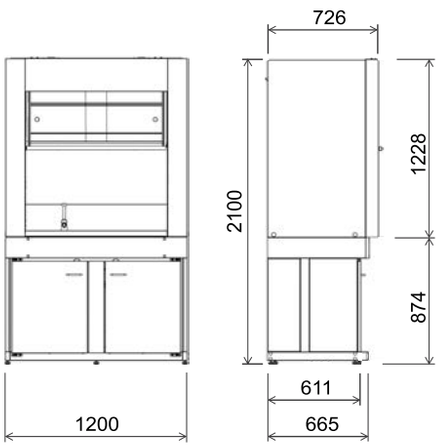

Рабочая зона — нержавеющая сталь:

- химически устойчива;
- легко моется;
- пожаробезопасна.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Раковина из нержавеющей стали	1 шт.
Смеситель с душем Broen	1 шт.
Система подвода и слива воды	1 шт.
Бак для сбора отходов из нерж. стали	1 шт.



ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ С МОЙКОЙ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Артикул	Д×Ш×В, мм	Глубина рабочей зоны, мм	Высота столешницы, мм	Глубина раковины, мм	Рабочая поверхность	Материал раковины	Вес, не более, кг
1-20050	1200×750×2100	610	900	280	нерж. сталь	нерж. сталь	390

Ширина 750 мм указана без учета размера вытяжного короба (см. чертеж).
Расположение тумб: с правой стороны расположен отсек с вытяжкой, с левой — сервисный отсек.



ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ

Предназначен для отвода вредных газов и испарений из муфельных печей и сушильных шкафов.

Конструкция шкафа позволяет размещать под ним одну подкатную тумбу.

ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-04260	980	800	1900	керамика	90

ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Предназначены для хранения посуды, приборов, легко воспламеняющихся жидкостей, жидких и сыпучих химических реактивов.



ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ И ПРИБОРОВ

Предназначен для хранения посуды и приборов, сыпучих химических реактивов, неагрессивных жидкостей. Нижняя дверь запирается на ключ. Верхняя дверь — стекло.

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, не более, кг
1-04510	600	400	1840	75

ШКАФ ДЛЯ РЕАКТИВОВ

Предназначен для хранения ЛВЖ, жидких и сыпучих химических реактивов. Имеет патрубок для подключения к вентиляции. Запирается на ключ.

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, не более, кг
1-04520	600	400	1840	80

ШКАФ-ТУМБА


Представляет собой нижнюю часть шкафа для хранения реактивов. Запирается на ключ.

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, не более, кг
1-04530	600	400	850	40

СТОЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОБ С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

Предназначен для подготовки сухих проб.

Подвижный рукав вытяжки обеспечивает комфортную работу лаборанта. Мощный люминесцентный светильник прекрасно освещает рабочую зону.

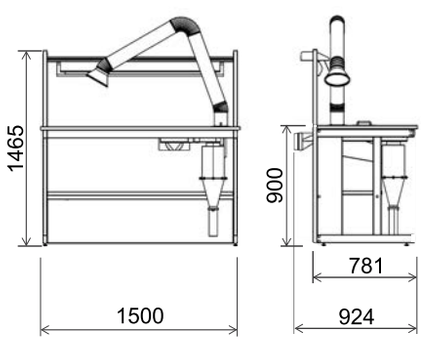




ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая поверхность	Вес, не более, кг
1-07396	1500	850	900/1465	нерж. сталь	180

СТЕЛЛАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕРИЯ МС

Металлические стеллажи серии МС — наиболее часто используемый вид стеллажей — решают широкий круг задач по хранению документации, оборудования, расходных материалов и позволяют легко оборудовать небольшой склад в лаборатории или на производстве.

- Широкий выбор типоразмеров полок (15 видов) и стоек позволяет создавать конфигурации стеллажей, максимально приспособленные к решению конкретной задачи.
- Основное достоинство металлических стеллажей серии МС — простота сборки и возможность дальнейшего наращивания и трансформации конструкции.
- Высокопрочное порошковое покрытие стеллажей устойчиво к истиранию и воздействию влаги.

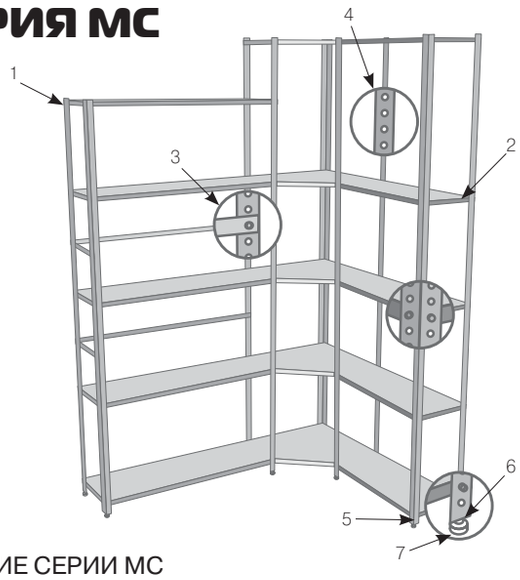

ДЕТАЛИ СТЕЛЛАЖА:

1.	Стойка
2.	Полка
3.	Ограничитель
4.	Переходник
5.	Уголок
6.	Подпятник
7.	Ножка винтовая

СТЕЛЛАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕРИИ МС


Артикул	Тип секции	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Количество полок	Нагрузка на полку, не более, кг
1-04825	прямоугольная	2000	1000	500	5	100
1-04445	прямоугольная	2000	700	500	5	100
1-04446	угловая	2000	750	750	5	100

Возможные размеры стеллажей: высота от 500 до 2500 мм; глубина от 300 до 800 мм. Шаг изменения высоты полок — 25 мм. Максимальная нагрузка на секцию — 400 кг. Расстояние от пола до нижней полки — не более 100 мм, расстояние между полками стеллажа — не более 600 мм.

СТЕЛЛАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕРИЯ СУ

Стеллажи универсальные серии СУ предназначены для оборудования складов, хранилищ, архивов и т.п. Отсутствие болтовых соединений — полки крепятся к стойкам через зацепы — значительно облегчает и ускоряет процесс сборки универсальных стеллажей.

- Секции стеллажей стыкуются между собой в единую линию, что снижает стоимость конструкции за счет экономии деталей стоек. Для увеличения жесткости стеллажей используются крестовины жесткости.
- Для хранения химреактивов рекомендуется использовать оцинкованные стеллажи.

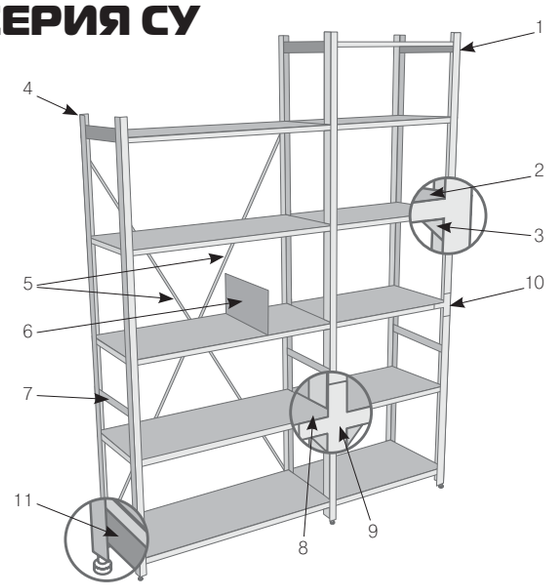

ДЕТАЛИ СТЕЛЛАЖА:

1.	Стойка
2.	Полка
3.	Зацеп
4.	Стяжка-заглушка
5.	Крестовина жесткости (пруток)
6.	Разделитель
7.	Поперечная стяжка
8.	Траверс
9.	Крестовина жесткости
10.	Полукрестовина жесткости
11.	Стяжка-подпятник

СТЕЛЛАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕРИИ СУ

Артикул	Тип секции	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Количество полок	Нагрузка на полку, не более, кг
1-04509	прямоугольная	2000	1000	500	5	300
1-04455	прямоугольная	2000	700	500	5	300


Возможные размеры стеллажей: высота от 1000 до 6000 мм; глубина от 300 до 800 мм. Шаг изменения высоты полок — 43,5 мм. Максимальная нагрузка на секцию — 1600 кг. Расстояние от пола до нижней полки — не более 100 мм, расстояние между полками стеллажа — не более 600 мм. Минимальное количество полок — 3.

СЕЙФЫ СЕРИИ РИПОСТ

Предназначены для хранения документов и химических веществ, требующих ограничения доступа.

- Корпус сейфа имеет двухслойный сварной металлический каркас с легким пожаростойким заполнением. В задней стенке корпуса имеются два отверстия для крепления сейфа к стене.
- Дверь сейфа и фасадная рама выполнены из стального листа толщиной 10 мм.
- Сейфы оборудованы замковыми системами POTENT (Италия).



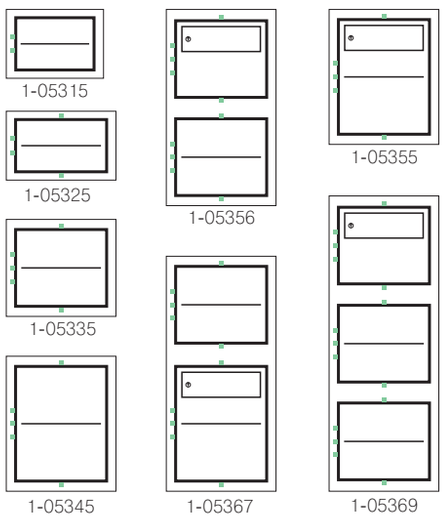

СЕЙФЫ СЕРИИ РИПОСТ

Артикул	Модель	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Внутренний объем, л	Вес, не более, кг
1-05315	P-20	280	350	235	10	20
1-05325	P-21	290	440	325	22	30
1-05335	P-23	440	435	420	52	50
1-05345	P-36	655	435	420	81	65
1-05355	P-36T	655	435	420	81	70
1-05356	P-46T	830	435	420	104	100
1-05357	P-59	1050	435	420	133	115
1-05359	P-69T	1210	435	420	156	150


СЕЙФЫ СЕРИИ СПУТНИК

Предназначены для хранения документов, ядовитых веществ и ЛВЖ.

- Корпус сейфа двухслойный сварной — лист 2 мм (марки ст. 3).
- Пожаростойкий наполнитель — минеральная вата.
- Дверь сейфа выполнена из металлического листа (марки ст. 3) толщиной 6 мм.
- Ригельная система — замок Керберос (Россия) с запиранием в три стороны.





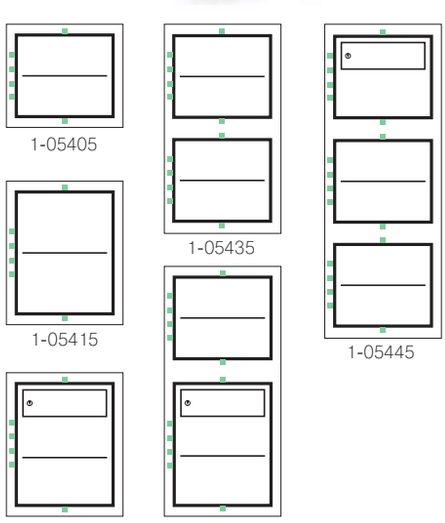

СЕЙФЫ СЕРИИ СПУТНИК


Артикул	Модель	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Внутренний объем, л	Вес, не более, кг
1-05405	P-07	435	435	420	58	45
1-05415	P-08	655	435	420	86	55
1-05425	P-081	655	435	420	86	120
1-05435	P-77	825	435	420	110	57
1-05445	P-777	1215	435	420	165	70
1-05455	P-781	1045	435	420	142	90


СТУЛЬЯ И ТАБУРЕТЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ


Лабораторные стулья и табуреты используются для работы в химических лабораториях за столами высотой 820…900 мм.

- Пневматическое подъемное устройство
- Опорное кольцо для ног
- Ролики или скользящие опоры (по выбору)
- Ролики рекомендованы для нескользкого покрытия пола



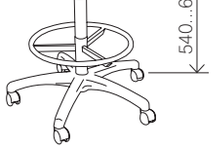

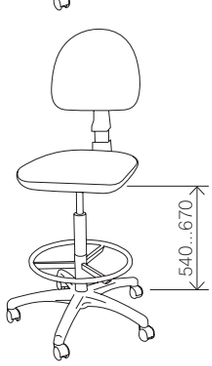

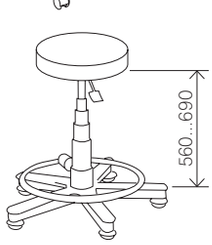

СТУЛЬЯ

Артикул	Покрытие сидения	Высота (min...max), мм	Примечание	Вес, не более, кг
1-04130	винил	540...670	на роликах	8
1-04135	полиуретан	540...670	на роликах	8
1-04140	винил	540...670	на опорах	8
1-04141	полиуретан	540...670	на опорах	8
1-04150	винил	410...540	офисный, на роликах	7
1-04155	полиуретан	410...540	офисный, на роликах	7

ТАБУРЕТЫ

Артикул	Покрытие сидения	Высота (min...max), мм	Примечание	Вес, не более, кг
1-04160	винил	560...690	на роликах	6
1-04165	полиуретан	560...690	на роликах	6
1-04170	винил	560...690	на опорах	6
1-05175	полиуретан	560...690	на опорах	6
1-04180	винил	410...540	офисный, на роликах	5

ELGA

НЕВАЛАБ

ЭКСПЕРТ В ОЧИСТКЕ ВОДЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ

Компания ELGA является признанным авторитетом в области очистки воды в течение более 50 лет, она была пионером в разработке многих инновационных технологий.

Являясь подразделением мирового лидера в водоснабжении компании Veolia Water Solution, компания Elga предлагает сегодня наиболее полную линейку систем водоочистки для лабораторных исследований, здравоохранения и диагностики.

Системы очистки воды PURELAB flex, разработанные с учетом Ваших требований, обеспечивают точность, гибкость и простоту эксплуатации вместе с инновационным и эргономичным дизайном.





ОЧИСТКА ВОДЫ — ЭТО ПРОСТО

- Эргономичный дизайн устройства дозирования
- Индикация сопротивления воды в точке отбора
- Мониторинг TOC в режиме реального времени для наиболее чувствительных аналитических методов
- Наиболее важная информация отображается постоянно (статус, TOC, неисправность)

Фильтры дополнительной очистки для разных приложений

- Удаление эндотоксинов, DNase, RNase и бактерий
- Соответствует международным стандартам: CLSI, CLRW, ISO 3696: Grade 1,2,3, ASTM D1193-06, Pharmacopeia USP, EP and JP

Широкие возможности дозирования:

- Управление скоростью потока — от режима капля за каплей до 2 литров в минуту
- Автоматическое дозирование от 50 мл до 6 литров, повторное дозирование
- Управление hands free при помощи педали (опционально)
- Фиксация режима подачи при заполнении сосудов



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

D

Durcon 6, 8, 9

E

EUROMAX, серия лабораторной мебели 14, 16-43

EUROMINI, серия лабораторной мебели 15, 44-54

L

LabGrade 7, 9

Q

Quarella 6

В

Вентиляционный блок 43

Весовой стол 24, 52

Вспомогательный стол 53

Встроенные тумбы 31

Вытяжной шкаф, конструкция 28-32

И

Инова 15

К

Компьютерный стол 53

Конструкция вытяжного шкафа 28-32

Контроль безопасности 32

Краны 10

Л

Лабораторная мебель серии EUROMAX 14, 16-43

серии EUROMINI 15, 44-54

Ламинат LabGrade 9

М

Мойка 12

Мойка для глаз 21, 22, 24

Н

Нержавеющая сталь, материал 7, 35-38

О

Окрашенная сталь, материал 7, 33, 34, 57, 59

Островной стол 20, 49

П

Письменный стол 53

Пластик ПВХ, материал 58

Поверхность рабочая 6

Подвесная тумба 14, 15

Поддон для реактивов 19, 21

Подкатная тумба 15

Полка 47

Приборный стол 18, 48

Принцип вытяжки 31

Пристенный стол 18, 46

Р

Рабочая поверхность 6

Раковина 12,13

С

Сейфы 63

Система предотвращения распространения пламени в воздуховодах (СПРПВ) 32

Скруббер 43

Сливная раковина 13

Смеситель 10

Сталь окрашенная, материал 7, 33, 34, 57, 59

нержавеющая, материал 7, 35-38

Стеклопластик, материал 7, 39-41

Стеклопластик, шкафы вытяжные 39, 40

Стеллаж 62

Стойка технологическая 19, 21

Стол

весовой 24, 52

вспомогательный 53

для подготовки проб с вентиляцией 61

компьютерный 53

островной 20, 49

письменный 53

приборный 18, 48

пристенный 18, 46

торцевой 22

Стол-мойка 23, 24, 50

Стол-приставка 51

Стул лабораторный 64

Сушилка настенная 50

Т

Табурет лабораторный 64

Тележка 53

Технологическая стойка 19, 21

Титровальная установка 25, 54

Торцевой стол 22

Тумба встроенная 31

подвесная 14, 15

подкатная 15

У

Установка титровальная 25, 54

Устройство вытяжного шкафа 28-32

Ф

Фитинги 29

Ш

Шкаф архивный 42

Шкаф

вытяжной во взрывозащищенном исполнении 37, 38

для нагревательных печей 61

для нефтепродуктов 60

для помещений с низким потолком 60

для установок большой высоты 34

модульный 59

с мойкой 36, 38, 40, 59, 60

с нагревательной платформой 41

серии EUROMAX 26-41

серии EUROMINI 56-59

для одежды 43

для посуды 42, 61

для реактивов 42, 61

для хранения баллонов 42

Шкаф-тумба 61

Э

Электрооборудование 11

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ





Наш адрес:
196158, Санкт-Петербург,
Московское шоссе, д.46,
ЗАО «НеваЛаб»

Почтовый адрес:
196158, Санкт-Петербург,
п/о 158, а/я 23

Телефоны:
+7 (812) 336-3200
+7 (812) 327-0152

Факс:
+7 (812) 336-3223

Электронная почта:
info@nevalab.ru

Интернет:
www.nevalab.ru

ISO 9001 DNV CERTIFIED ORGANISATION

Система управления качеством, действующая в компании, соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008

© НеваЛаб, 2011

Вы также можете получить и другие информационные материалы:

Каталоги:

- **«Лабораторное оборудование»**
- **«Лабораторная посуда. Средства измерения из стекла»**
- **«Расходные материалы для лаборатории»**
- **«Готовые решения для контроля качества ЛКМ, покрытий и пластиков»**

Информационные материалы:

- Измерение цветности: топлива и смазки, светлые масла и парафины, нефтехимические продукты, прозрачные жидкости
- Спектрофотометр для анализа воды Lovibond® SpectroDirect
- Система для определения БПК Lovibond® OxiDirect
- Получение чистой и сверхчистой воды
- Системы очистки воды Purelab Flex
- Переносной фотометр для анализа воды Lovibond® MultiDirect
- Портативные приборы для электрохимических измерений Lovibond® SensoDirect
- Lovibond® – измерение цветности. Масла и жиры
- Счетчики газа Shinagawa®
- Стандартные образцы Conostan® для анализа нефти и нефтепродуктов
- Блескомеры MICRO-GLOSS
- SPECTRO-GUIDE: спектрофотометр и блескомер в одном приборе
- Контроль атмосферного воздуха
- Переносной газоанализатор PG-250
- Анализ нефтепродуктов в воде OCMA-350

ЗАО «НеваЛаб»
Московское шоссе, 46

196158, Санкт-Петербург, Россия
Тел.: +7 (812) 336-3200, 327-0152
Факс: +7 (812) 336-3223

info@nevalab.ru
www.nevalab.ru

ISO 9001 DNV CERTIFIED ORGANISATION